

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2026



Dr. Armando Camejo

Director

Rony Sánchez

Encargado de Mantenimiento

OBJETIVO GENERAL

Realizar el Plan de Mantenimiento Hospitalario para este centro de 3er. Nivel de atención Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina 2026, para garantizar la prestación de los servicios de salud de manera Eficiente, Oportuna y con Calidad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ❖ Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos físicos para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo posible de la inversión económica, en los recursos para la atención en salud y contribuir a la reducción de los costos de operación de la Institución.
- ❖ Determinar las herramientas, recursos económicos y de personal para la evaluación y control de los distintos equipos biomédicos.
- ❖ Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza los recursos físicos del Hospital.
- ❖ Distribuir de manera eficiente y coordinada los recursos, que permitan llevar a cabo el mantenimiento hospitalario.
- ❖ Contribuir a que la atención en salud, cumpla con las características de calidad previstas en el numeral 9, artículo 153 de la ley 100 de 1993 y en el Decreto 2174 de 1996.

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS

Los recursos técnicos y operativos que dispondrá el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, serán:

- Funcionario para el mantenimiento de los equipos de cómputo y/o contrato de Prestación de Servicios.
- Un contrato de prestación de servicios para el mantenimiento preventivo y correctivo de los Equipos Biomédicos y de los aires acondicionados de propiedad del Servicio Nacional Salud (SNS), en este contrato se incluirán la calibración y metrología de los equipos que por norma lo requieran.
- Entidades Públicas, privadas y/o personas naturales.

Proveedores de bienes e insumos de acuerdo a las necesidades y a los equipos.

El Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, en procura del desempeño eficiente de sus objetivos y comprometidos con el cumplimiento del ordenamiento legal dispuesto en la Circular Externa 029 de 1997 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, Decreto 1769 de 1994 y su aclaratorio, Decreto 1617 de 1995, se propuso diseñar el siguiente Plan de Mantenimiento Hospitalario, con la firme intención de garantizar la calidad en la prestación de los servicios de salud, una de las cuales es la disponibilidad y suficiencia de recursos mencionada en el Decreto 2174 de 1996, en su artículo tercero.

Debe entenderse por mantenimiento hospitalario "la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo" (Artículo 7, Decreto 1769 de 1994).

Así las cosas, la Gerencia de la Empresa Social del Estado Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, se permite presentar el nuevo Plan de Mantenimiento Hospitalario para la vigencia 2026, herramienta que permitirá garantizar el uso continuo y óptimo de los distintos recursos del centro de salud ya sean equipos biomédicos, informáticos y de infraestructura.

El Plan de Mantenimiento Hospitalario 2026, consta de dos partes:

- ❖ Mantenimiento a la Dotación (Equipos Biomédicos, Industriales y de Sistemas).
- ❖ Mantenimiento de la infraestructura física del Servicio

Generalidades

Definiciones

El mantenimiento se define como la preservación o conservación de una edificación y su contenido, para que sirva a su propósito establecido. Algunos autores lo definen como el "conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar las propiedades (inmuebles, equipos, instalaciones, herramientas), en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido".

El mantenimiento incluye las actividades y tareas que están orientadas a:

- Conservar en óptimas condiciones un bien, de acuerdo a sus especificaciones técnicas, con el fin de que este preste un buen servicio.
- Mantener en operación continua, confiable y económica un bien.
- Preservar y alargar la vida útil de un bien, garantizando su adecuado funcionamiento según los estándares establecidos.

Un aspecto importante a ser considerado para la implementación del mantenimiento, es el ciclo de vida de los bienes que forman parte del establecimiento de salud. Este ciclo consta de las siguientes tres fases:

- La primera fase que se caracteriza por las fallas debido a defectos de fabricación e instalación. Para un establecimiento de salud, esta primera fase debe ser cubierta con la garantía de la empresa proveedora o instaladora del bien, o constructora de la edificación.
- La segunda fase es normalmente el período donde el bien trabaja sin fallas, el caso de ocurrencia de una falla es ocasional.
- La tercera fase se caracteriza por la presencia de fallas típicas vinculadas al tiempo de operación del bien que ocasionan el desgaste de sus componentes.

Cuadro 1

Estimación de vida útil y porcentaje del costo en relación a la inversión inicial de los componentes de un establecimiento de salud

Componente	Vida útil	Relacional costo de la inversión inicial
Equipos móviles	5 - 8 años	5%
Equipos fijos	15 a 20 años	15%
Obra civil	40 a 50 años	30%
Instalaciones ^{1/}	20 años	50%

Fuente: Programación, desarrollo y mantenimiento de los establecimientos de salud. Publicación científica N° 441. OPS.

^{1/} Incluye los sistemas sanitarios, eléctricos, electro-mecánicos y las instalaciones de oxígeno, vacío y gases medicinales.

- Cada equipo, mobiliario o elementos de la infraestructura de este establecimiento de salud tienen un tiempo característico de aprovechamiento y de funcionamiento, el cual deberá ser considerado al momento de diseñar y desarrollar el programa de mantenimiento, así como del programa de reposición de bienes.

El mantenimiento de los establecimientos de salud es importante debido a que contribuye a:

- Garantizar la seguridad de los pacientes, visitantes, estudiantes y personal que utilizan los recursos tecnológicos del establecimiento.
- Mantener la calidad de la atención en salud, en concordancia con los estándares y la normatividad vigente.
- Conservar la infraestructura física, las instalaciones y los equipos en condiciones operativas para no producir la interrupción del servicio.
- Reducir la vulnerabilidad de los establecimientos de salud ante situaciones de emergencias y desastres.
- Disminuir los costos de operación del servicio.

Tipos de Mantenimientos

- Considerando las formas de intervención en el mantenimiento, éste se puede clasificar en:

Preventivo

Intervención periódica y programada para evaluar el estado de funcionamiento de un bien con la finalidad de identificar fallas para lograr que los equipos, instalaciones y la infraestructura física estén en completa operación y en niveles óptimos de eficiencia. Ésta incluye: inspecciones (de funcionamiento y de seguridad), ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación y calibración.

Entre las ventajas que genera este tipo de mantenimiento se tienen:

- ❖ Confiabilidad en la operación de los bienes generando mejores
- ❖ condiciones de seguridad.
- ❖ Disminución del tiempo muerto debido a la interrupción del servicio.
- ❖ Mayor duración de los equipos e instalaciones.
- ❖ Menor costo de reparación.

Predictivo

Es la intervención que se realiza en los equipos que aparentemente se encuentran en perfecto estado; sin embargo, cuando los medimos o evaluamos con algunas herramientas comenzamos a detectar fallas. Para determinar el estado de los equipos se usan aparatos especiales como: sensor de vibraciones, osciloscopio y detectores de ruidos. A diferencia del preventivo, que debe aplicarse en conjunto, el mantenimiento predictivo puede aplicarse por pasos.

Este tipo de mantenimiento tiene las siguientes ventajas:

- Reduce los tiempos de parada del equipo.
- Facilita hacer el seguimiento de la evolución de un defecto, se sugiere contar con una bitácora que permita la verificación, tanto periódica como de lo accidental, lo que puede ser usado en el mantenimiento correctivo.
- Optimiza la gestión del personal de la unidad de mantenimiento.
- Permite conocer con exactitud el tiempo límite de actuación que no implique el desarrollo de un fallo imprevisto.
- Facilita el análisis de las averías.

Correctivo

Es el conjunto de procedimientos utilizados para la reparación o corrección de las fallas de un bien que presenta mal funcionamiento o inadecuado rendimiento. La falta de implementación del mantenimiento correctivo en forma oportuna y eficiente puede generar:

- Desconfianza en la utilización de los bienes debido a los riesgos que se pueden producir.
- Tiempo indefinido del bien fuera de servicio, lo que afecta la producción del establecimiento de salud.
- Reducción del tiempo de vida útil de los bienes.
- Incremento de la carga de trabajo para el personal de la unidad de mantenimiento.
- Un mayor costo por las reparaciones que se tienen que realizar.

Comparación de los tipos de mantenimiento

Preventivo	Predictivo	Correctivo
Revisión programada en base a calendarización.	Detección de defectos y programación de reemplazo antes de la avería.	Reparación de un bien que se averió.
Procedimiento orientado a mantener un bien en óptimo funcionamiento.	Permite prevenir las futuras fallas del bien y evita llegar al correctivo.	Conjunto de las actividades orientadas a restablecer la operación del bien.
Evita que falle un bien.	Está basado en las estadísticas.	Responde a una falla imprevista urgente.
Se basa en historial, manuales y recomendaciones.		

Elaboración propia

Considerando la planificación de las tareas de mantenimiento que se muestran en la figura 1, se tienen:

- ❖ Tarea programada: incluye el servicio rutinario, la rehabilitación y las tareas del mantenimiento preventivo programado.
- ❖ Tarea no programada: realizada en respuesta a la demanda de los usuarios, e incluye las reparaciones por fallas y emergencia.
- ❖ Mantenimiento preventivo (preventive maintenance): orientada a mantener el establecimiento en su máxima capacidad de funcionamiento mediante la inspección y reparación rutinaria. Tiene como finalidad la identificación de pequeños problemas antes que éstos se vuelvan grandes y de costosa reparación o reemplazo.
- ❖ Mantenimiento rutinario (routine maintenance): incluye el mantenimiento general de las áreas comunes para conservar la infraestructura y su contenido en buenas condiciones. Forma parte del ámbito de trabajo habitual del personal. Se realiza mientras el bien está en servicio.
- ❖ Mantenimiento correctivo (corrective maintenance): consiste en la reparación de la infraestructura y de la dotación del servicio debido al desgaste natural o mantenimiento preventivo deficiente. Para los equipos, puede ser la reparación o el reemplazo.
- ❖ Mantenimiento de servicio (service maintenance): se realiza a requerimiento de los usuarios del servicio. Incluyen algunas acciones de emergencia para evitar graves consecuencias.
- ❖ Mantenimiento diferido (deferred maintenance): se refiere a que en forma ocasional el mantenimiento programado puede ser diferido para otra fecha, debido a limitaciones presupuestales y disponibilidad de repuestos.

CRONOGRAMA PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

2026

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CRITICIDAD	RECURSOS A IMPLEMENTAR
Planta Eléctrica Diésel de 500 KVA	Bloque A	BUENO	DIARIO	Todo el año	a) Cambio filtro de aceite. b) Limpieza de polos de baterías/suministro de agua de batería. c) Cambiar el elemento anticorrosivo del agua. d) Cambio de los filtros de combustible. e) Cambio de aceite. f) Mantenimiento preventivo en general. g) Limpieza y el protocolo correspondiente según propuesta y contrato.	Mantenimiento, Electricista	Alta	Inspección de rutina, compra de filtros, aceite, anticorrosivo y piezas de repuesto.
Planta Eléctrica Caterpillar de 500 KVA	Bloque B	BUENO	Diario	Todo el año	a) Cambio filtro de aceite. b) Limpieza de polos de baterías/suministro de agua de batería. c) Cambiar el elemento anticorrosivo del agua. d) Cambio de los filtros de combustible. e) Cambio de aceite f) Mantenimiento preventivo en general. g) Limpieza y el protocolo correspondiente según propuesta y contrato	Mantenimiento, Electricista	Alta	Inspección de rutina, compra de filtros, aceite, anticorrosivo y piezas de repuesto.
Subestación eléctrica	Bloque A	BUENO	Mensual	Enero-Diciembre 2026	a) cambio filtro de aceite. b) Limpieza de polos de baterías/suministro de agua de batería. c) Cambiar el elemento anticorrosivo del agua. d) Cambio de los filtros de combustible. e) Cambio de aceite. f) Mantenimiento preventivo en general, limpieza y el protocolo correspondiente según propuesta y contrato.	Mantenimiento, Electricista	Alta	Revisión periódica, compra de filtros, aceite, anticorrosivo y piezas de repuesto.
Mantenimiento de red eléctrica	Segundo nivel	BUENO	Diario	Todo el año	a) Inspección de cuartos eléctricos. b) Cambio de tubos fluorescentes y lámparas. c) Inspecciones de tomas corrientes e interruptoras, cambio si requiere y revisión en general.	Mantenimiento, Electricista	Media	Inventario de luminarias, tomas e interruptores, herramientas de medición, y equipos de seguridad.

Mantenimiento de red eléctrica	Tercer nivel	BUENO	Mensual	Enero-Diciembre 2026	a) Inspección de cuartos eléctricos. Cambio de tubos fluorescentes y lámparas. b) Inspección de toma corriente e interruptora. c) Cambio si requiere y revisión en general.	Mantenimiento, Electricista	Media	Inventario de luminarias, tomas e interruptores, herramientas de medición, y equipos de seguridad.
Mantenimiento De Infraestructura Y Planta Física	Bloque A	Bueno	Mensual	Enero-Diciembre 2026	a. Revestimiento De Paredes b. Revestimiento De Piso Con Resina Epoxi. c. Resane De Paredes d. Corrección De Fisura En Techo	Mantenimiento, Pintor y Albañil	Media	Inventario de materiales de pintura, resina epoxi, masilla para resane, herramientas de albañilería y seguridad.
Mantenimiento De Infraestructura Y Planta Física	Bloque B	Bueno	Mensual	Enero-Diciembre 2026	a) Revestimiento De Paredes b) Revestimiento De Piso Con Resina Epoxi c) Resane De Paredes d) Corrección De Fisura En Techo	Mantenimiento,Pintor Y Albañil	Media	Inventario de materiales de pintura, resina epoxi, masilla para resane, herramientas de albañilería y seguridad.
Acondicionador de aire ductiable 5 ton R-410	Planta Física Bloque A Y B	Bueno	Diario/Semanal/Mensual	Todo el Año	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insolación de tubería de cobre.	Mantenimiento, Técnico De Refrigeración Y Eléctricos	Alta	Inventario de gas R-410, tuberías de cobre, aislamiento, herramientas de medición y equipos de seguridad.
Acondicionador de arie Split de 12-18-24 y 36 Btu	Planta Física Bloque A Y B	Bueno	Diario/Semanal/Mensual	Todo el Año	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insolación de tubería de cobre.	Mantenimiento,Técnico De Refrigeración Y Eléctricos	Media	Inventario de gas R-410, tuberías de cobre, aislamiento, herramientas de medición y equipos de seguridad.
Acondicionador de arie tipo VRF 15 ton R-410	Planta Física Bloque A Y B	Bueno	Diario/Semanal/Mensual	Todo el Año	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insolación de tubería de cobre.	Mantenimiento, Técnico De Refrigeración Y Eléctricos	Alta	Inventario de gas R-410, tuberías de cobre, aislamiento, herramientas de medición y equipos de seguridad.
Acondicionador de arie tipo Paquete 10 ton R-410	Planta Física Bloque A Y B	Bueno	Diario/Semanal/Mensual	Todo el Año	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insolación de tubería de cobre.	Mantenimiento, Técnico De Refrigeración Y Eléctricos	Alta	Inventario de gas R-410, tuberías de cobre, aislamiento, herramientas de medición y equipos de seguridad.
Aire Acondicionado Mirage 18000btu	Planta Física Bloque A Y B	Bueno	Diario/Semanal/Mensual	Todo el Año	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insolación de tubería de cobre.	Mantenimiento, Técnico De Refrigeración Y Eléctricos	Media	Inventario de gas R-410, tuberías de cobre, aislamiento, herramientas de medición y equipos de seguridad.

Nevera	Vacunación	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2026	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico De Refrigeración Y Eléctricos	Alta	Inventario de gas refrigerante, herramientas de medición, y equipos de seguridad.
Nevera Panorámica	Farmacia	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2026	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico De Refrigeración Y Eléctricos	Alta	Inventario de gas refrigerante, herramientas de medición, y equipos de seguridad.
Nevera	Odontología	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2026	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico De Refrigeración Y Eléctricos	Media	Inventario de gas refrigerante, herramientas de medición, y equipos de seguridad.
Nevera	Farmacia	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2026	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico De Refrigeración Y Eléctricos	Alta	Inventario de gas refrigerante, herramientas de medición, y equipos de seguridad.
Otoscopio	Emergencia	Bueno	Trimestral	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza y desinfección. Cambio de las baterías, asegurándose de que no haya signos de corrosión u oxidación. Siempre reemplace AMBAS pilas. Se recomiendan baterías alcalinas. Retire las baterías del mango si el instrumento no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Media	Inventario de baterías (alcalinas), solución desinfectante y material de limpieza.
Nevera De Gas	Vacunación	Bueno	Trimestral	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina y electricista	Alta	Inventario de piezas eléctricas, termómetros calibrados, y equipo de limpieza.
Balanza Pediátrica	Vacunación	Bueno	Trimestral	Marzo-Diciembre 2026	Lubricación, calibración reguladora de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Inventario de pesas de calibración, lubricantes y material de limpieza.
Lavadora LG Motor Smart Inverter	Aseo general	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2026	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Mantenimiento, Electricista	Media	Inventario de repuestos del motor, lubricantes, detergentes y equipo de seguridad.

Ambulancia OJZ-593	Parqueo	Bueno	Mensual	Enero-Diciembre 2026	Cambio de aceite de motor cada 5000 kilómetros, alineación y balanceo mensual, rotación de llantas, engrase general, cambio de pastillas, cambio de llantas, cambio de líquidos en general, tensión de frenos, engrases de rodamientos, cambio de batería, cambio de bandas, ajuste de carrocería, cambio de correas, sincronización, cambio de discos delanteros y demás mantenimiento que se requiera anula.	Chofer Y Mecánico Por Contratar	Alta	Presupuesto para combustible, aceite, filtros, neumáticos, piezas de motor y repuestos en general.
ALMACEN	Mantenimiento	Bueno	Mensual	Enero-Diciembre 2026	Revisión y verificación de las piezas mecánicas - Verificación del voltaje de alimentación y del sistema electrónico - Verificación del estado del tablero digital.	Mantenimiento	Media	Inventario de piezas mecánicas, herramientas de medición de voltaje, y personal capacitado en electrónica y electricidad.
Incubadora	Pre-Parto	Bueno	Trimestral	Marzo-Diciembre 2026	Verificación de componentes, Revisión de motor, Revisión termostato control RPM, Inspección de la cúpula y seguros puertas, Verificación y comprobación del panel frontal, Revisión de la tarjeta mother board, Cambio termostato control de temperatura (si requiere), Revisión y ajuste de temperatura, Revisión y cambio de filtro bacteriológico, Verificación de alarmas, Reemplazo de batería (si es necesario), Juego de mangas (si es necesario), Calibración general, Limpieza general, Test de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Filtros bacteriológicos, termostatos de repuesto, baterías, tarjetas electrónicas (Mother Board), juegos de mangas, equipos de calibración de temperatura y humedad, y herramientas de diagnóstico electrónico.
Aspirador (2)	Pre-Parto	Bueno	Trimestral	Marzo-Diciembre 2026	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Mangueras de succión, vasos recolectores y filtros de repuesto, equipos de calibración de presión, y material de desinfección.
Camilla Ginecologica	Pre-Parto	Bueno	Trimestral	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Lubricantes y grasas especiales de grado médico, piezas de repuesto para mecanismos (engranajes, pistones), y material de desinfección.

Aire Acondicionado Tipo Spleet	Pre-Parto	Bueno	Trimestral	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico De Refrigeración	Alta	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante, productos de limpieza especializados para serpentines, herramientas de medición eléctrica (voltímetro) y de temperatura.
(2) Lámpara Cuello De Ganso	Pre-Parto	Bueno	Trimestral	Marzo-Diciembre 2026	Comprobación alimentación eléctrica, Cambio de cable alimentación AC (si requiere), Cambio de portalámpara (si requiere), Cambio porta bombillos (si requiere), Reemplazo bombillo halógeno (de ser necesario), Cambio bombillo corriente (si requiere), Reparación fuente alimentación (si requiere), Cromado general (si es necesario), Cambio interruptor encendido (si es necesario), Limpieza y ajuste general, Comprobación de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Bombillos halógenos y de corriente de repuesto, cables de alimentación, portalámparas, interruptores de encendido, y herramientas de soldadura o reparación electrónica.
Balanza Pediátrica	Pre-Parto	Bueno	Trimestral	Marzo-Diciembre 2026	Lubricación, calibración reguladora de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Pesas de calibración certificadas, lubricantes de grado médico, material de limpieza y desinfección, y piezas de repuesto para el mecanismo de pesaje.
Unidad Odontológica	Consultorio Odontológico	Bueno	Trimestral	Marzo-Diciembre 2026	Prueba de funcionamiento, mantenimiento general, chequeo de fugas (agua, aire), chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Kits de sellos y juntas tóricas para prevenir fugas, aceites para turbinas, repuestos para mangueras y válvulas, manómetros de calibración y desinfectantes.
Compresor De Aire	Consultorio Odontológico	Bueno	Trimestral	Marzo-Diciembre 2026	Calibración de presión, chequeo fuga de aire, calibración, apagado y encendido automático, verificación línea de tensión 110volt.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Filtros de aire, aceite lubricante (si aplica), repuestos para válvulas de seguridad y presostatos, herramientas de detección de fugas.
Nevera	Consultorio Odontológico	Bueno	Trimestral	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina y refrigeración	Media	Termómetros de calibración, kits de limpieza, herramientas para chequeo eléctrico (multímetro), y repuestos básicos de refrigeración (relés, termostatos).

Amalgamador	Consultorio Odontológico	Bueno	Trimestral	Marzo-Diciembre 2026	Limpie el equipo con un trapo húmedo y detergente suave, Verifique que realice un correcto encendido y apagado levantando la puerta de seguridad al dar la orden de inicio, Evalúe el sonido producido, Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Verificar contactos de la tarjeta electrónica, Revisión y lubricación del motor, Verificación de estado de funcionamiento de microswitch, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores, Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Cápsulas de prueba de amalgamación, lubricantes de motor, microswitches de repuesto, herramientas de diagnóstico electrónico y temporizadores calibrados.
Horno Esterilizador	Consultorio Odontológico	Bueno	Trimestral	Marzo-Diciembre 2026	Se realiza limpieza del equipo, Revisión de voltaje de red y polo tierra, Revisión del regulador, controlador o termostato mecánico, según sea el caso, Limpieza de la tarjeta electrónica y componentes eléctricos, Realizar la prueba de funcionamiento del equipo haciendo tomas de temperatura en 5 puntos diferentes y en diferentes tiempos con una termocupla (Fluke), Verificación de temperatura ambiente interna durante 24h. Revisar temperatura y humedad ambiente externa con patrón calibrado, Verificar integridad y funcionamiento de sensor de control.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Termocuplas calibradas (p.ej., Fluke) para validación de temperatura, termostatos y reguladores de repuesto, fusibles, y equipos de medición de voltaje y resistencia de polo a tierra.
(3) Microscopio de 2 lentes y 4 focos	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Kits de limpieza óptica de grado médico (paños, soluciones), bombillas de repuesto, reguladores de voltaje, y herramientas de calibración de luz.
Microcentrífuga (3)	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Tacómetro calibrado para la validación de RPM, lubricantes y grasas especiales para motores, repuestos de escobillas (si aplica), y material antivibración.

Micro Centrifuga de 24 tubos	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Tacómetro calibrado para la validación de RPM, lubricantes y grasas especiales para motores, repuestos de escobillas (si aplica), y material antivibración.
Microscopio	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Kits de limpieza óptica de grado médico (paños, soluciones), bombillas de repuesto, reguladores de voltaje, y herramientas de calibración de luz.
Centrífuga de 6 tubos (2)	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Tacómetro calibrado para la validación de RPM, lubricantes y grasas especiales para motores, repuestos de escobillas (si aplica), y material antivibración.
Máquina de Hemograma	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza, mantenimiento general, rastreo y limpieza de manguera de diluyente internamente, comprobación de (startus), calibración, lubricación de motor de jeringa y limpieza de sensor de jeringa Comida de muestras.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Reactivos de calibración y control de calidad (QC), lubricantes de motor de jeringa, kits de limpieza para mangueras y sensores, y herramientas de diagnóstico para el software.
Nevera	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración	Crítica	Termómetros calibrados (para validación de temperatura), repuestos de sellos de puerta, gas refrigerante, y repuestos básicos eléctricos (termostatos, relés).
Rotador de VDRL	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza superficial, lubricación de partes mecánicas, verificación de controles de velocidad y tiempo, revisión de alimentación eléctrica.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Tacómetro calibrado (para validación de RPM), lubricantes de grado fino, paños de limpieza, y repuestos de cables o aislantes.
Colorímetro	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza integral externa e interna, Revisión y limpieza de sistema electrónico (tarjetas, cableado, display), Revisión y limpieza cámara porta-muestras, Verificación de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Estándares de referencia o blancos (para calibración), solución de limpieza para cubetas, hisopos de limpieza de óptica, y herramientas de diagnóstico electrónico.

Equipo de Química BS-200	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo- Diciembre 2026	Prueba de funcionamiento, chequeo sistema óptico, chequeo filtros, chequeo lamp. Halógena, limpieza, mantenimiento general.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Reactivos de Calibración específicos del equipo, lámparas halógenas de repuesto, filtros ópticos, kits de limpieza para el sistema de fluidos y celdas de lectura.
Microscopio (2)	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo- Diciembre 2026	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Kits de limpieza óptica (soluciones y paños), bombillas y reguladores de voltaje de repuesto.
Centrífuga de 24 tubos	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo- Diciembre 2026	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Tacómetro Calibrado (para validación de RPM), lubricantes y grasas especiales, repuestos de escobillas/rotores.
(2) Aire Acondicionado Tipo Spleet	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo- Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Filtros de aire de grado hospitalario, gas refrigerante, y herramientas de medición de temperatura y humedad.
(3) Pipetas Automáticas	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo- Diciembre 2026	Verificación sistema de succión, verificación sistema calibración de micro litros, limpieza y lavado general.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Microbalanza o Calibrador de Pipetas con pesos certificados, sellos y juntas tóricas de repuesto, y puntas de pipeta de control de calidad.
Microscopio de 2 lentes y 4 focos	BACILOSCOPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo- Diciembre 2026	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Kits de limpieza óptica, bombillas de repuesto, y herramientas de calibración de luz y enfoque para asegurar diagnósticos precisos de tuberculosis.
Aspiradores	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo- Diciembre 2026	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Mangueras, vasos recolectores y filtros de repuesto; manómetros calibrados para verificación de presión; material de desinfección.

Desfibrilador PT 9000 B	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Revisión de componentes, Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, Reparación fuente de alimentación, Ajuste printer calibración térmico (SI REQUIERE), Verificación de desfibrilación sincrónica, Revisión kit baterías, Prueba del cable de paciente, Limpieza y ajuste general, Ajuste del armazón.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Simulador de Desfibrilación para pruebas de energía y sincronía; kit de baterías de repuesto; papel térmico para la impresora; cables de paciente y paletas de repuesto.
Monitor	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y mantenimiento preventivo.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Simuladores de Signos Vitales (ECG, SpO2, NIBP) para calibración; transductores y sensores (pulsioxímetro, temperatura) de repuesto; filtros de papel para impresoras.
Electrocardiograma	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza y mantenimiento electrodos de succión, chequeo parámetros.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Simulador de ECG para calibración; electrodos de succión y cables de paciente de repuesto; papel de impresión; herramientas de medición de fuga de corriente.
Nebulizador	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Filtros de aire de repuesto; lubricantes de grado fino; kits de nebulización (mangueras y mascarillas); manómetro para chequeo de presión de aire.
Equipo de Laringoscopia	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Mantenimiento general, Cambio de bombillo (si requiere), Cambio de baterías (si es necesario), Ajuste y limpieza general, Comprobación funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Baterías de repuesto (pilas alcalinas o recargables), bombillos/LEDs de repuesto, hojas y mangos de laringoscopio de diferentes tamaños, y material de limpieza no abrasivo.
Laringoscopio	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Mantenimiento general, Cambio de bombillo (si requiere), Cambio de baterías (si es necesario), Ajuste y limpieza general, Comprobación funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Baterías de repuesto, bombillos/LEDs de repuesto, hojas y mangos adicionales, y material de limpieza.

Monitor	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y mantenimiento preventivo.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Simuladores de Signos Vitales para calibración, cables, sensores y transductores de repuesto (ECG, SpO2, NIBP), y herramientas de medición de fuga de corriente.
Glucómetro	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza superficial, almacenamiento adecuado, uso de paño con agua y detergente suave.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Solución de control (Niveles Alto y Bajo) para calibración y verificación, tiras reactivas de prueba, y material de limpieza suave.
Autoclave	CENTRAL DE ESTERILIZACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Chequeo fuga de corriente, verificación de resistencias calentadoras, limpieza general.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Indicadores biológicos y químicos para validar la esterilización, resistencias calentadoras y sellos de puerta de repuesto, herramientas de medición de voltaje y temperatura (termopares).
Monitor	CIRUGÍA 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y mantenimiento preventivo.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Simuladores de Signos Vitales (para calibración), cables, sensores y transductores de repuesto, herramientas de medición de fuga de corriente.
Aspirador	CIRUGÍA 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Mangueras, vasos recolectores y filtros de repuesto, manómetros calibrados para verificación de vacío, material de desinfección.
Cauterio	CIRUGÍA 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Revisión y arreglo de perillas, Limpieza general interna, Revisión y arreglo de display, Limpieza general externa, Revisión de cable de energía y fusibles, Pruebe de alarmas y conector de placas, Verificación de funcionamiento, con pedal y lápiz, Verificación de funcionamiento con cable y pinza bipolar.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Analizador de Electrocirugía (para verificar potencia y seguridad), placas de paciente, lápices, pedales y fusibles de repuesto, herramientas para diagnóstico electrónico.

Mesa de Cirugía	CIRUGÍA 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Aceite y lubricantes especiales para sistemas hidráulicos, repuestos para piñonería, frenos y sellos hidráulicos, herramientas para alineación y nivelación.
Aspirador	CIRUGÍA 2	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Mangueras, vasos recolectores y filtros de repuesto, manómetros calibrados para verificación de vacío, y material de desinfección de alto nivel.
Mesa de Cirugía	CIRUGÍA 2	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Aceite y lubricantes especiales para sistemas hidráulicos, repuestos para piñonería, frenos y sellos hidráulicos, herramientas de alineación y nivelación.
Aspirador de Cirugía	CIRUGÍA 2	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Mangueras, vasos recolectores y filtros de repuesto, manómetros calibrados para verificación de vacío, y material de desinfección de alto nivel.
Mesa de Cirugía	CIRUGÍA MENOR	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Aceite y lubricantes especiales, repuestos para piñonería, frenos y sellos hidráulicos, herramientas de alineación.

Rayos X Portátil	RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Verificación funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeo selectores de kv, amp.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Dosímetro/Cámara de ionización (para control de calidad de la dosis y colimación), bombillas/LEDs de colimación, herramientas de medición de voltaje y corriente (kV, mA), y repuestos del interruptor de disparo.
Máquina Reveladora	RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza exhaustiva de racks, tanques, rodillos y guías, sustitución del filtro del ventilador, descarga y reposición de líquidos.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Líquidos de revelado y fijado de repuesto, filtros de ventilador, rodillos y guías de transporte de película, contenedores de líquidos etiquetados.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Alta	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante, y herramientas de medición de temperatura y humedad para mantener el ambiente estable.
Negatoscopio	YESO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable ac, Mantenimiento preventivo.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Media	Lámparas fluorescentes de 20W y balastos de repuesto, interruptores de encendido, y material de limpieza para la pantalla difusora.
Nebulizador	ALMACÉN DE FARMACIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Filtros de aire de repuesto, lubricantes de grado fino, y kits de nebulización (mascarillas y mangueras).
Negatoscopio	CONSEJERÍA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable ac, Mantenimiento preventivo.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Baja	Lámparas fluorescentes de 20W y balastos de repuesto.
Aparato para Examinar Oídos (Otoscopio)	CONSEJERÍA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza y desinfección. Cambio de las baterías, asegurándose de que no haya signos de corrosión u oxidación. Siempre reemplace AMBAS pilas. Se recomiendan baterías alcalinas. Retire las baterías del mango si el instrumento no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Media	Baterías alcalinas de repuesto, espéculos (puntas) desechables, y soluciones desinfectantes.

Sonógrafo	SONOGRAFÍA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y Mantenimiento preventivo.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Phantom de Ultrasonido (para control de calidad de la imagen), gel de ultrasonido no abrasivo, repuestos para transductores, y herramientas de diagnóstico electrónico.
Electrocardiograma	ELECTRO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Mantenimiento general, Verificación de componentes y periféricos, Calibración General, Cambio juego de chupas (si requiere), Juego de Electrodos para extremidades (si es necesario), Calibración, ajuste y limpieza general.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Crítica	Simulador de ECG para calibración, juego de chupas y electrodos de repuesto, papel de impresión para el trazado, y herramientas de medición de fuga de corriente.
Nebulizador	SALA DE PEDIATRIA # 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Filtros de aire de repuesto, lubricantes de grado fino, y kits de nebulización (mascarillas y mangueras) para recambio.
Aparato de Oftalmología	DERMATOLOGÍA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Mantenimiento general, Verificación de componentes y periféricos, Calibración General, Calibración, ajuste y limpieza general.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Media	Patrones de calibración óptica, bombillas o fuentes de luz de repuesto, y kits de limpieza para lentes y espejos.
Nebulizador	REHIDRATACIÓN ORAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Filtros de aire de repuesto, lubricantes de grado fino, y kits de nebulización de recambio.
Aire Acondicionado Amerinan 12 Inverter	DIRECCIÓN (ENCARGADA)	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Media	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante (si se requiere recarga), productos de limpieza especializada para bobinas, y herramientas de diagnóstico eléctrico.
Aire de Ventana de 24000 BTU	SUB-DIRECCIÓN	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Media	Filtros de aire de repuesto, lubricantes para el motor del ventilador, limpieza especializada de bobinas y bandeja de condensación.

Aire Acondicionado Tipo Mini Split	CUARTO MÉDICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Alta	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante, y herramientas de diagnóstico para asegurar un ambiente de descanso y disponibilidad.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	ADMINISTRACIÓN	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Media	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante (si se requiere recarga), productos de limpieza especializada.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	SALÓN DE ACTO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de electromedicina	Baja	Filtros de aire de repuesto y material de limpieza general.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	RECURSOS HUMANOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Media	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante, y herramientas de diagnóstico eléctrico.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	ESTADÍSTICA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Media	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante, y herramientas de diagnóstico eléctrico.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	FARMACIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Alta	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante, y termómetros calibrados para monitoreo de temperatura ambiente.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	ALMACÉN DE FARMACIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Crítica	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante, termómetros/registradores de temperatura para la cadena de frío, y plan de contingencia por falla.
Aire Acondicionado Amerinan 12 Inverter	FACTURACIÓN	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Media	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante, y herramientas de diagnóstico eléctrico.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	CONSEJERÍA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Baja	Filtros de aire de repuesto, material de limpieza para bobinas y desagüe.

Aire Acondicionado Tipo Spleet	ODONTOLOGÍA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Media	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante, herramientas de diagnóstico eléctrico para evitar fallos.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	SONOGRAFÍA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Alta	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante, termómetros calibrados para monitoreo de temperatura, plan de contingencia por falla.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	ENFERMERÍA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Media	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante, y herramientas de diagnóstico eléctrico.
Aire de Ventana de 24000 BTU	DESCANSO DE CIRUJANOS	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Alta	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante, y herramientas de diagnóstico para asegurar el confort del personal crítico.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	PRIVADO #1	BUENO	TRIMESTREAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Baja	Filtros de aire de repuesto y material de limpieza general.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	PRIVADO #2	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Baja	Filtros de aire de repuesto, material de limpieza general.
Aire Acondicionado de Ventana	PRIVADO DE DENGUE	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Alta	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante, herramientas de diagnóstico eléctrico y control de temperatura para aislamiento.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	CIRUGÍA 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Crítica	Filtros de alta eficiencia (si aplica) de repuesto, gas refrigerante, manómetros para verificar la presión positiva del quirófano, certificación de calidad del aire.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	CIRUGÍA 2	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo-Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Crítica	Filtros de alta eficiencia (si aplica) de repuesto, gas refrigerante, manómetros para verificar la presión positiva del quirófano, certificación de calidad del aire.

Aire Acondicionado Tipo Spleet	CIRUGÍA MENOR	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo- Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Alta	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante, y herramientas de diagnóstico eléctrico.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	ÁREA DE PREPARAR MATERIAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo- Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Crítica	Filtros de aire de repuesto, gas refrigerante, y termómetros calibrados para asegurar condiciones de esterilización y almacenaje.
Aire Acondicionado Tipo Spleet	SALA DE ESPERA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo- Diciembre 2026	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Técnico de refrigeración y electricista	Baja	Filtros de aire de repuesto, material de limpieza para bobinas y desagüe.
Planta Eléctrica	ESTACIÓN ELÉCTRICA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo- Diciembre 2026	Chequeo voltaje de salida, mantenimiento general, limpieza, engrase, lubricación, ajuste, chequeo sistema eléctrico, prueba de funcionamiento.	Mantenimiento, Electricista	Crítica	Combustible (Diésel), aceite de motor y filtros (aceite, aire, combustible) de repuesto, Banco de Carga para prueba de funcionamiento bajo estrés, Multímetro/Analizador de Calidad de Energía.

Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Computo e Impresoras.

El objetivo General:

Determinar las condiciones de operación de los equipos de cómputo y su impresora para disminuir los daños ocasionados por factores de falta de limpieza y presencia de fallas.

Mantenimiento Preventivo:

La finalidad es prevenir y minimizar la probabilidad de fallas, mediante el reemplazo o ajuste de aquellos elementos de mayor desgaste o uso en los equipos.

El cronograma de mantenimiento de los equipos de cómputo y sus impresoras, se realizara los 15 primeros días del mes de Enero del año a programar y debe considerar la totalidad de los equipos de cómputo e impresoras de la Empresa.

El responsable del mantenimiento de los equipos e impresoras, deberá cumplir con las fechas establecidas en el cronograma.

Los mantenimientos preventivos serán realizados en el horario que no afecte o Interfiera el trabajo de los usuarios, a menos que por necesidad sea Solicitado en horario de trabajo.

Este servicio se brindará con un mínimo de 2 veces al año por equipo o en el caso de requerimientos o a pedido de servicios puntuales.

Las rutinas de mantenimiento a realizar varían de acuerdo al tipo de equipos, sin embargo en forma general deberán cubrir los siguientes aspectos:

- Contactar y notificar al usuario interno la fecha y hora en que se realizara el mantenimiento.
- Acudir el día y hora convenida al sitio establecido.

CPUs:

- Desmontaje, limpieza interna, aspirado, verificación de tarjetas, limpieza de drives, limpieza externa
- Análisis del sistema (Sectores defectuosos del disco). Limpieza y
- revisión de teclado
- Limpieza y revisión de monitor
- Desfragmentación del disco y scan disk.
- Desinfección de virus informáticos.
- Verificación de la instalación de Software no autorizado.
-

IMPRESORAS:

- Desmontaje, aspirado, limpieza interna y externa.
- Revisión y alineamiento de cabezal (Impresoras de inyección de tinta) Limpieza de
- Rodillos.
- Pruebas de impresión

UPS:

- Desarmado Revisión de
- baterías
- Limpieza y pruebas de funcionamiento.

ANTIVIRUS:

- Instalación y Configuración.
- Actualización Periódica.
- Revisión y comprobación en los equipos

En caso de encontrar un daño o desperfecto que amerite remplazo o compra de Piezas y/o accesorios en la ejecución del mantenimiento será necesario realizar un mantenimiento correctivo. Para esto el responsable de la realización del mantenimiento, levantará un reporte técnico de diagnóstico que justifique la compra de las partes o accesorios dañados o en mal estado.

Mantenimiento Correctivo:

Se deberá brindar el servicio de atención de emergencia ante un desperfecto Presentado en cualquier equipo de la Empresa, para este servicio, el usuario afectado deberá realizar una solicitud en el formato **"REPORTE DAÑO DE EQUIPO"** el cual solicitara en la oficina de Información para la calidad y luego de diligenciado lo devolverá a dicha oficina para iniciar el proceso de solución al impase, informando al encargado del servicio de mantenimiento de equipos de cómputo de la Institución, lo reportado.

Recomendaciones a los usuarios finales:

El responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, deberá informar al usuario al momento de finalizado el proceso de mantenimiento del equipo lo siguiente:

- Actividades realizadas al equipo de cómputo y su impresora.
- Fallas encontradas en el equipo y/o impresora y los pasos a seguir.

Encender el equipo para que el usuario verifique su buen funcionamiento.

- Entregar diligenciado el formato “**CONSTANCIA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO**” y solicitar al usuario responsable del equipo para que verifique lo realizado a este y diligencie la casilla de satisfacción o no de la prestación del servicio.
- Notificar al responsable del equipo de cómputo, la importancia de realizar copias periódicas de respaldo de la información almacenada en el equipo.
- Registrar y/o actualizar la hoja de vida de los equipos y anotar lo realizado y los hallazgos.

El responsable del mantenimiento de los equipos de cómputo, deberá archivar las constancias de mantenimiento de equipos como evidencias para las auditorias de cumplimiento del objeto del contrato y la generación del indicador satisfacción de los usuarios del sistema.

Mantenimiento de la Infraestructura física del Servicio

Definiciones

El mantenimiento es la combinación de las acciones orientadas a conservar o restaurar en condiciones aceptables la edificación, lo cual incluye: limpieza, inspección, reparación y reemplazo de los elementos dañados o deteriorados.

Debemos considerar que todas las edificaciones se deterioran en un cierto plazo de tiempo debido a los efectos del clima, el uso y el desgaste de los elementos. Sin embargo, este proceso inevitable puede ser controlado, y la vida física de los establecimientos prolongada si se mantienen apropiadamente.

El mantenimiento de la infraestructura física está relacionado a factores físico–funcionales. Los problemas pueden generarse por el diseño rígido de los ambientes, inadecuada ubicación de los mismos y la disfuncional relación entre éstos y el abastecimiento de los servicios básicos.

El mantenimiento de la infraestructura física del servicio tiene como objetivos:

- Prolongar la vida útil de la infraestructura física.
- Mejorar la capacidad operativa de los servicios.
- Incrementar la seguridad del establecimiento ante los desastres.
- Reducir las tasas de deterioro de las edificaciones.
- Disminuir el costo de reparación y reemplazo.

Tiempo de vida útil de algunos componentes de las edificaciones

Elemento	Años
Mampostería	25
Estructura de madera	15
Mampostería con estructura de concreto	40
Mampostería con estructura de acero	40
Cielo raso ^{1/}	8 a 12
Puertas ^{2/}	10 a 15
Piso ^{3/}	5 a 20
Selladores	5
Señalética	5
Pintura y tapiz de pared	5
Reja interna y externa	15
Cobertura de techo	10
Paneles interiores	15
Protección Rayos X	10

Fuente: American Hospital Association, 1998. Estimated useful lives of depreciable hospital assets.

^{1/} Depende del acabado del cielo raso: acústico (8 años) y yeso o escayola (12 años).

^{2/} Depende del tipo de puerta: metálica (15 años) y madera (10 años).

^{3/} Depende del tipo de material del piso: alfombra (5 años), cerámico (20 años), concreto (20 años), parquet (10 años), terrazo (15 años) y vinílico (10 años).

2.2 Tipos de mantenimiento

El mantenimiento de la infraestructura de las edificaciones de salud incluye los siguientes tipos:

Limpieza

La limpieza tiene como objetivo retirar las impurezas de los elementos de la edificación, las cuales pueden ser restos de naturaleza orgánica, inorgánica, y derivadas de fenómenos físico-químicos. La acumulación y permanencia de estas impurezas en las edificaciones pueden generar: abrasión, corrosión, adherencia, aislamiento y conductividad eléctrica, y transmisibilidad biológica.

La limpieza es importante para mantener la satisfacción de sus ocupantes, el atractivo de la planta física, y el valor de la propiedad. Una limpieza apropiada requiere que la edificación esté adecuadamente diseñada de tal manera que el acceso a las zonas a ser limpiadas sea fácil, y que los componentes –del mismo modo– puedan ser fácilmente limpiados. Por lo tanto el diseño funcional de la edificación y la calidad de los materiales, son de gran importancia para facilitar las actividades de limpieza.

Los procedimientos de limpieza más comunes son:

- **Manual:** es la forma más sencilla de retirar las impurezas de las superficies e incluye: (1) el sacudido para eliminar el polvo de las superficies mediante un lienzo seco o húmedo, (2) el cepillado para desprender las impurezas que se encuentran adheridas a superficies pequeñas, (3) el barrido para eliminar las impurezas de los pisos, zócalos, contra-zócalos y enchapes, y que puede ser complementado con (4) el trapeado para una limpieza profunda utilizando algún tipo de solución o agua.
- **Mecánico:** es el procedimiento recomendado para una limpieza a gran escala e incluye: (1) la filtración mediante el uso de un filtro que retiene las partículas de mayor tamaño, un ejemplo de ello es la operación de aspirado, (2) el cepillado mecánico, recomendado para la limpieza de grandes superficies

con restos de pintura y herrumbre, y (3) el sopleteo que utiliza aire o agua disparada a gran velocidad con la finalidad que llege a los intersticios y hendiduras.

También se puede utilizar el sopleteo con chorro de arena para remover las escamas de laminación y el oxido de superficies con enchapes de laja de piedra, canto rodado y otros materiales.

Inspección

Es la verificación, reconocimiento o comprobación del estado actual de la infraestructura física e instalaciones de un establecimiento de salud. Esta actividad debe estar adecuadamente programada, tomando en consideración las características técnicas de la edificación.

Es necesario que se programe un número diferente de inspecciones por intervalo de tiempo dependiendo de los diferentes tipos de elementos y bienes en los establecimientos de salud. Las inspecciones son importantes debido a que reducen el trabajo de reparaciones de emergencia, disminuyen los costos de reparación y reemplazo, y contribuyen al ahorro de recursos al reducir lasfallas en el funcionamiento de las edificaciones.


Frecuencia de inspecciones recomendadas para edificaciones

Tipo de edificaciones	Frecuencia de inspecciones (número de días)
Hospitales y otros establecimientos de salud	90 – 120
Centros de educación	120 – 180
Centros de alimentación	90 – 120
Bases militares	90 – 120
Edificaciones administrativas	120 – 180
Centro recreativos	90 – 180
Almacenes	180

Fuente: Preventive maintenance for buildings and structures other than family housing. Technical manual Preventive maintenance facilities engineering buildings and structures. Department of the Army. Washington D.C. 1979

Las inspecciones programadas facilitan detectar en forma oportuna los defectos comunes que se presentan principalmente en los elementos no estructurales de las edificaciones de salud, entre los cuales tenemos algunos de los mencionados en las figura 2.

Defectos comunes en elementos de la infraestructura de los establecimientos de salud

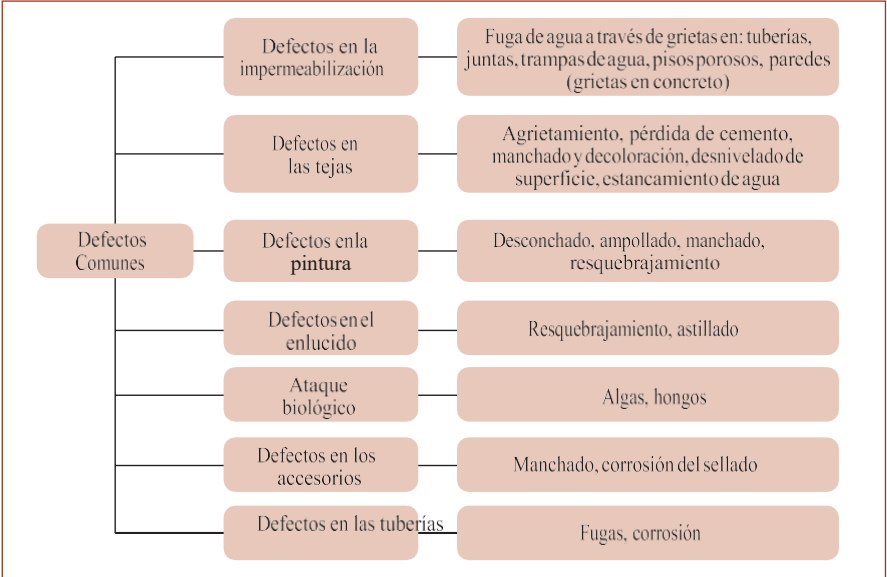

Reparación y reemplazo

Como parte del proceso de inspección, se identificarán aquellos elementos de la infraestructura física del servicio que requieren ser reparados o reemplazados para evitar potenciales fallas o problemas.

Pintura

Es un aspecto importante de la conservación de los elementos estructurales y no estructurales de los establecimientos de salud, que debe considerar los tipos de superficies a ser pintadas, las condiciones particulares de la edificación y la exposición a la intemperie. Debe ser realizada con materiales de buena calidad.

Las necesidades de pintura, tanto del interior como del exterior de la Empresa deberán determinarse sobre análisis particulares y requerimientos aplicables a cada caso, tomando en consideración factores predominantes tales como: localización geográfica, condiciones climatológicas, grado de deterioro de las superficies pintadas requerimientos funcionales de la edificación y apariencia.

Los trabajos de pintura deberán ser ejecutados de manera que sea posible garantizar su preservación, condiciones de limpieza y saneamiento, iluminación o visibilidad.

Las pinturas se clasifican, generalmente por la naturaleza del vehículo o el nombre del pigmento y pueden ser:

- Pinturas plásticas: están compuestas por resina sintética (vinílica o acrílica) emulsionada en agua. Son las más empleadas para pintar paredes. Son pinturas de secado rápido, inodoras porque no utilizan solventes, se presentan con acabado brillante, satinado o mate y son lavables.
- Pinturas al temple: son pinturas para interiores de bajo costo, presentadas en polvo o pasta, para diluirse en agua. Tienen buena adherencia en las paredes de yeso, pero no son lavables y se ensucian fácilmente.
- Esmaltes sintéticos: tienen como base resinas alquídicas y requieren de solventes para su dilución y limpieza. Su tiempo de secado oscila entre 5 y 10 horas. Ofrecen un acabado duro, resistente y lavable. Se presentan con acabado brillante para exteriores, y satinado o mate para interiores.
- Pintura oleosintética: también está compuesta por resinas, pero se le agrega una cierta cantidad de aceite, por lo general de linaza. Con un secado lento que puede alcanzar las 10-15 horas, brindan un acabado de dureza y brillo pobre. Su ventaja es que son lavables.
- Barnices: son pinturas sintéticas transparentes, aplicables sobre madera. Poseen un acabado satinado, brillante o mate. También pueden presentarse con coloración, destinados a brindar un acabado similar a ciertas maderas, como nogal, caoba, roble, castaño y otros. Algunas variedades poseen una gran resistencia al desgaste, son los preferidos para parqué y otros elementos muy expuestos. Cabe citar el barniz marino, una clase de pintura que da a la madera un acabado extraordinario, resistencia y brillo que la protegerá al máximo de raspones y ralladuras.
- Al duco: son pinturas compuestas por suspensiones coloidales de éteres celulósicos (nitrocelulosa o acetilcelulosa) en líquidos muy volátiles, a los que se agregan sustancias plastificantes, resinas y pigmentos, para darle flexibilidad, brillo, adherencia, dureza y color.
- Pinturas epóxicas: son un grupo de pinturas de alta resistencia a diferentes ataques. Estas pinturas presentan gran resistencia química, sin que les afecten los disolventes, aceites o grasas. Tienen gran resistencia al roce y tráfico pesado. Excelente adherencia sobre cemento. Aunque presentan buena resistencia a los agentes atmosféricos, su color puede llegar a amarillearse o decolorarse debido al efecto de los rayos ultravioleta.
- Imprimante: es una pasta a base de látex, que no es una pintura. Se utiliza como fijador y sellador antes de aplicar la pintura, al secarse deja una capa dura, lisa y resistente a la humedad. Se emplea

sobre superficies naturales (sin pintura previa), para evitar que el material absorba demasiado y favorecer así la adherencia de la pintura. Este producto evita que la pintura se cuartee o desconche y puede cubrir pequeñas imperfecciones o colores previos.

El responsable de la unidad de mantenimiento debe programar un exhaustivo mantenimiento preventivo de los elementos estructurales y no estructurales, especialmente de aquellos que están sometidos a la acción del clima o están en riesgo ante el inminente inicio de la temporada de eventos naturales, principalmente los de tipo hidro-meteorológicos que pudiesen causar daños en la edificación.

2.3 Mantenimiento de los elementos estructurales

Los elementos estructurales son aquellas partes de la edificación que la mantiene en pie. Incluyen cimientos, columnas, muros portantes, vigas y diafragmas (pisos y techos diseñados para transmitir fuerzas horizontales, como las de los sismos, a través de las vigas y columnas hacia los cimientos).

El plan de mantenimiento de los elementos estructurales se establecerá en concordancia con la base de cálculo y con la información generada durante la ejecución de la obra, la cual facilitará la identificación de: (1) los tipos de trabajos de mantenimiento a realizarse, (2) el listado de los elementos que requieren un mantenimiento especial, (3) el alcance, la realización y la periodicidad de los trabajos de conservación y (4) el cronograma de inspecciones.

Las estructuras convencionales de los establecimientos de salud no requieren un nivel de inspección superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de otras edificaciones. Es recomendable que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años. Las acciones de mantenimiento se orientarán a proteger a la edificación de los cambios de uso y sobrecargas en las estructuras, de la acción de los agentes químicos y de la humedad que pudiesen provocar la corrosión de los elementos estructurales.

Como parte de la conservación, se recomienda que los muros, columnas y vigas sean pintados con productos a base de resinas de caucho sintético, utilizando diferentes colores según las normas de la institución y las actividades que se realizan en los ambientes.

Cimentación

El mantenimiento de los cimientos es difícil de realizar por lo que es más fácil prever problemas y prevenir su degeneración en la etapa de construcción; incorporando medidas de protección, que tomen en cuenta los factores que puedan modificar su durabilidad, siendo la humedad el principal elemento del cual deben protegerse.

Los cimientos y muros de contención bajo el nivel del suelo deben estar impermeabilizados, lo que debe realizarse durante el proceso constructivo; en caso se realice en forma posterior será un procedimiento costoso. Las paredes interiores del establecimiento bajo nivel del piso también deben tener una buena barrera contra la humedad.

Se recomienda proteger las cimentaciones que dan hacia los exteriores, mediante la construcción de veredas que las cuiden, especialmente de la humedad. Estas veredas tendrán al menos treinta centímetros de ancho. Se debe evitar la existencia de jardines junto a las edificaciones, y de existir estos, deben tener veredas circunsdantes.

Columnas y muros portantes

Cada año se realizará una inspección visual para detectar la posible aparición de grietas, fisuras, deformaciones, aparición de humedad y manchas diversas; así como la erosión anormal y excesiva de paños aislados, desconchados o descamaciones. Cada cinco años, un personal especializado inspeccionará los muros para detectar si se han producido alteraciones por la acción de los agentes atmosféricos, fisuras por asentamientos locales, erosión y pérdida de mortero en las juntas, y la aparición de humedad y manchas diversas.

Juntas de dilatación

Se recomienda realizar una inspección de las juntas de dilatación por un personal especializado, cada dos años. A los cinco años, se efectuará una inspección visual para detectar fisuras y grietas; deformaciones, desconchados en el revestimiento, señales de humedad y cualquier tipo de lesión en la estructura; así como la renovación de los sellados deteriorados en las juntas de dilatación.

2.4 Mantenimiento de los elementos no estructurales

Los elementos no estructurales incluyen a los que están unidos a las partes estructurales de la edificación: tabiques, ventanas, techos, puertas, cielos rasos y otros, a los que también se les denomina componentes arquitectónicos. Además, están incluidos otros elementos que cumplen funciones esenciales como: calefacción, aire acondicionado, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, sistema electromecánico y gases medicinales a los cuales se les denomina instalaciones especiales (1).

Elementos arquitectónicos

Escaleras

Una vez por año, las escaleras serán inspeccionadas para detectar la existencia de fisuras o cualquier otro tipo de daño. Cada mes, se realizará la limpieza de las barandas y pasamanos con un trapo seco o ligeramente humedecido con agua y jabón neutro. No debe usarse ácidos, lejías o productos abrasivos. Cada año, se inspeccionará la fijación de los soportes para identificar la aparición de manchas de óxido procedentes de los anclajes. La pintura de estos elementos se realizará cada dos años en climas muy agresivos; cada tres en climas húmedos o cada cinco en climas secos. Se recomienda que se coloque doble pasamanos para el uso de adultos mayores, niños y discapacitados.

Las barandas y pasamanos no deben usarse como apoyo de andamios ni como elementos destinados a la subida de muebles o cargas. En caso se observe riesgo de desprendimiento de algún elemento o la aparición de manchas de óxido procedente de la corrosión de los anclajes, se deben reparar de inmediato. Se debe evitar que las barandas y pasamanos sufran golpes o el vertido de ácidos, lejías, productos de limpieza y agua

-procedentes de las jardineras o de los techos- que puedan afectar los materiales constituyentes de las barandas y pasamanos.

En el caso de los ascensores, el personal especializado realizará periódicamente la limpieza del foso del recinto del ascensor, la comprobación del funcionamiento del teléfono interior y el alumbrado además de la limpieza del cuarto de máquinas.

Puertas y ventanas metálicas

Durante la inspección, se pondrá especial atención a los marcos metálicos de las puertas, ventanas y cercos de seguridad, los cuales deben estar bien pintados para evitar su oxidación, especialmente en lugares cercanos al mar o que presenten alta salinidad en el ambiente.

La limpieza de las puertas y ventanas metálicas se realizará cada semana. Se usará un trapo húmedo y soluciones jabonosas, cuando existan manchas aisladas.

Cada año se realizará la revisión y engrase de los engranajes; y a los tres años se efectuará el pintado de las puertas y ventanas, previo a ello, se deberá aplicar un tratamiento antioxidante, luego se aplicarán dos o más capas de pintura a base de aceite. Los elementos de aluminio no requieren pintura pero deben mantenerse limpios para evitar su decoloración y pérdida del anodizado.

Como parte de las medidas de conservación, se debe evitar el uso de elementos abrasivos, disolventes, acetona, alcohol y otros productos que pudiesen dañar los elementos y el cierre violento de las hojas de las puertas y ventanas de metal.

Paredes y muros interiores

Se programará la limpieza de estos elementos cada semana y el pintado una vez por año. Durante la inspección de las paredes se buscará desprendimientos de pintura, desplomes, destrucción parcial u vestigios de humedad. Los muros interiores pueden pintarse con imprimante, temple, esmalte, pintura epóxica y látex. Se recomienda empezar por el techo, siguiendo a continuación por la pared por la que entra la luz natural (ventana) y finalizando con el pintado de las puertas, zócalos y ventanas. Si se observa que la pared es muy porosa o de reciente construcción, se recomienda aplicar el imprimante.

Paredes y muros exteriores

En la inspección, se buscará desprendimientos de pintura, desplomes, destrucción parcial o vestigios de humedad. La limpieza de los muros exteriores debe realizarse cada semana y el pintado al menos una vez por año. Los cercos o muros perimetrales requieren una inspección por lo menos una vez por año y el pintado de los elementos de ladrillo, metal y madera en forma regular. En el pintado se puede utilizar imprimante, látex, esmalte o sellador. Se recomienda no pintar cuando el tiempo es húmedo o lluvioso, o cuando hace mucho sol. En caso de superficies ya pintadas es necesario limpiarlas previamente.

Es necesario realizar inspecciones periódicas de todas las juntas y aberturas alrededor de las ventanas y puertas. Se deben efectuar las reparaciones de las juntas deterioradas mediante la aplicación de una nueva capa de mortero y realizar el masillado de las juntas para prevenir que las estructuras metálica y de madera sufran daños.

Las mallas de alambre galvanizado que son usadas en los cercos perimetrales requieren tratamiento anticorrosivo y pintura en forma periódica.

El pintado de las paredes y muros debe ser programado considerando las características particulares de cada establecimiento de salud: tomando en cuenta la localización geográfica, condiciones climatológicas (frecuencias de lluvias), el grado de deterioro de las superficies pintadas y la apariencia de la edificación.

Pisos

La inspección periódica puede facilitar la detección de hundimientos, el deterioro por tránsito, humedad, ruptura por impacto o fugas, y deterioro por uso de productos químicos. Se recomienda evitar la utilización de productos abrasivos y objetos punzantes que pueden rayar, romper o deteriorar el pavimento; así como la caída de objetos punzantes o de peso y las rayaduras producidas por el giro de las puertas o el movimiento del mobiliario que no tenga protección en los apoyos.

Los pisos cerámicos pueden limpiarse periódicamente mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no abrasivos. La eliminación de las manchas por existencia de humedad puede realizarse con lejía doméstica. Cada tres años, se recomienda revisar los revestimientos con reposición de estos si fuese necesario; y cada cinco años, la comprobación del estado y relleno de las juntas, cubrejuntas y zócalos que requieran material de relleno y sellado.

El piso de terrazo se limpiará periódicamente mediante lavado con jabón neutro. Se recomienda evitar el encharcamiento de agua que por filtración, pueden afectar el forjado y las armaduras del terrazo. Cada año, se debe realizar el encerado o pulido en los pavimentos de tránsito muy intenso.

Puertas resistentes al fuego

Se evitará el cierre violento de las hojas de las puertas. Para la limpieza de las puertas se usará un trapo húmedo cuando existan manchas aisladas. Cada año, se efectuará la revisión y engrase de los engranajes y cierre de seguridad, y a los tres años se renovará la pintura de las puertas, y la comprobación de la inmovilidad del entramado y empanelado.

Un personal especializado realizará cada dos años, la revisión del estado de los mecanismos, del líquido del freno retenedor y el estado de los elementos del equipo automático, sustituyendo las piezas que estuviesen defectuosas.

Señalética

Las señales funcionales 2 y de seguridad³ del establecimiento de salud deben ser instaladas según las normas y estándares establecidos, procurando que éstas sean fácilmente identificables y visibles para todos los usuarios del servicio. El tamaño de las señales debe estar acorde con la distancia a las que deben ser percibidas. Se recomienda evitar el uso de señales adhesivas o pintadas en las paredes o muros, y columnas que rápidamente se deterioran o son cubiertas durante el pintado periódico del establecimiento.

La inspección de la señalética debe incorporarse como parte del mantenimiento preventivo programado. Si durante la inspección, se observase el deterioro de los rótulos o paneles de señalización, deberán sustituirse por otros de similares características. No se usarán productos abrasivos en su limpieza, ni se colgarán elementos sobre las señales que impidan su perfecta visualización o causen su deterioro.

² Señales que establecen la identificación de las unidades, áreas y ambientes del establecimiento; así como información de orientación al personal, pacientes y visitantes

³ Estas señales pueden ser de advertencia o precaución, emergencia, evacuación, obligación, prohibición y protección contra incendios

Techos

Se deben realizar inspecciones periódicas de los techos al menos una vez por año para identificar fisuras y rupturas, fugas y filtraciones originadas por la expansión y contracción de las cubiertas y techos debido a las variaciones de temperatura del ambiente. Se recomienda

poner atención en las zonas alrededor de las proyecciones, ductos de ventilación, aberturas para iluminación y otros.

En la inspección de los cielos rasos se debe buscar rastros de humedad, depresiones, quebraduras, perfiles vencidos y daños por insectos. Se recomienda que los cielos rasos estén pintados con imprimante, temple o esmalte. Se programará la limpieza de estos elementos cada semana y el pintado una vez por año. Se evitará someter a los techos de revestimiento de placas de escayola o de yeso laminado, a una humedad relativa habitual superior al 70% o al salpicado frecuente de agua. Cada año, se debe revisar el estado de conservación para detectar desprendimientos del soporte base, anomalías o desperfectos.

Los falsos techos deben ser lisos, limpios, resistentes a la corrosión y al fuego, teniendo cuidado con el uso apropiado de las rejillas de registro y otros dispositivos que sino están adecuadamente instalados pueden dañar el material de este tipo de cielos. Se debe verificar el estado de conservación de los soportes; así como inspeccionar el estado de las instalaciones que corren a lo largo de este tipo de techos, procurando identificar fugas u otro tipo de daños.

Para el caso de las chimeneas, se debe verificar en forma periódica la estanqueidad de la instalación al humo. No se fijará a los conductos ningún tipo de elemento. Se recomienda poner atención en los techos cercanos a las chimeneas y ductos de ventilación.

Para el caso de las canaletas, se debe evitar la acumulación de sedimentos, cuerpos extraños y vegetación, así como el vertido de productos químicos agresivos. Anualmente, se limpiarán las canaletas o canalones y las bajantes de aguas pluviales, y se comprobará su funcionamiento previo al inicio del período de lluvias.

Vidrios

Se evitará la proximidad a fuentes de calor elevado, y el vertido de productos cáusticos capaces de dañar al vidrio. Si se observa riesgo de desprendimiento de alguna hoja o fragmento, se debe efectuar la reparación inmediata. Cada mes, se limpiará la suciedad y el polvo con un ligero lavado de agua y el uso de productos de limpieza no abrasivos nialcalinos.

Zona de estacionamiento

Por lo menos una vez por año, se debe revisar y mantener las bocas de las alcantarillas, desagües y colectores de agua pluviales cercanos a las vías de circulación vehicular. En la pista donde estacionan los vehículos; se realizará la reparación de las zonas resquebrajadas, rotas y en mal estado, así como la señalización y demarcación de zonas de seguridad externa y parqueo.

Instalaciones

Instalaciones eléctricas

Son el conjunto de elementos conductores, de protección, control, medida y salida para utilización de la energía eléctrica. Estas instalaciones incluyen:

- Equipos de respaldo como los grupos electrógenos y UPS. Estos equipos se consideran como equipos industriales de uso asistencial.
- Acometida: es el conductor eléctrico que va desde el punto de suministro de la red pública

Hasta el tablero general del establecimiento.

- Tableros: incluye los generales, de distribución y de cargas especiales, los cuales pueden estar empotrados o adosados.
- Alimentadores eléctricos: son los conductores que van desde el tablero general a los tableros de distribución.

Instalaciones eléctricas interiores: son el conjunto de circuitos eléctricos como los tomacorrientes (enchufes), elementos de iluminación y cargas especiales.

Instalaciones eléctricas exteriores: corresponde al circuito de iluminación externa, paneles, anuncios y otros elementos.

Pozo a tierra: son las instalaciones eléctricas que se utilizan en el suelo para dispersar diferentes tipos de corrientes. Estos elementos tienen como objetivos:

- Garantizar la integridad física del personal y de los bienes que operan con equipos eléctricos.
- Evitar voltajes peligrosos entre estructuras, equipos y el terreno en condiciones normales o durante fallas de operación.
- Dispersar las pequeñas corrientes provenientes de los equipos electrónicos.
- Dispersar a tierra las corrientes de falla y las provenientes de sobretensiones ocasionadas por rayos, descargas en líneas o contactos no intencionales con la estructura metálica de un equipo eléctrico.

Pararrayos: son los elementos que protegen a las edificaciones frente a la caída de los rayos atmosféricos.

Otros componentes como: seccionadores, interruptores termo magnéticos, interruptores diferenciales y electrobombas.

El mantenimiento de estas instalaciones se orienta a asegurar el suministro continuo y óptimo de la energía eléctrica a las unidades del establecimiento, así como la iluminación acorde a las necesidades para la realización de las actividades asistenciales, administrativas y formativas del establecimiento.

Cada mes, se realizará la limpieza y verificación del aislamiento de las tuberías, cajas de derivación, múltiples salidas para equipos fijos y móviles, tomacorrientes, luminarias y el alumbrado de emergencia; así como la limpieza y verificación del buen funcionamiento de las llaves de interrupción e interruptores magneto-térmicos. Adicionalmente, cada tres meses se verificará el estado de los acumuladores de la luces de emergencia.

Cada año, cuando el terreno esté más seco y después de cada descarga eléctrica, se efectuará la comprobación de la continuidad eléctrica y reparación de los defectos encontrados en los dispositivos de la puesta a tierra. Posteriormente, a los dos años, se comprobará la línea principal y derivada de tierra mediante la inspección visual del estado de las conexiones y la continuidad de las líneas.

Cada dos años, las cajas de derivación requieren de una inspección visual del estado del interruptor de corte y de los fusibles de protección, reparándose los defectos encontrados; así

Como la revisión del estado de corrosión de la puerta metálica de las cajas.

ILUMINACIÓN

Para conservar una lámpara fluorescente en óptimo estado de funcionamiento se deben seguir las siguientes recomendaciones:

- ✓ Colocar en posición de apagado el interruptor que gobierna el circuito al cual está conectada la lámpara, antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento.
- ✓ Sustituir los tubos ante la presencia de parpadeo o manchas negras en sus extremos, ya que esto indica que su vida útil a llegado a su fin.
- ✓ Si se presenta alguna falla intempestiva, verificar que las conexiones internas de la luminaria no se hayan aflojado o estén sueltas.
- ✓ Verificar que el voltaje de alimentación a la luminaria sea el indicado por el fabricante (ver especificaciones en el empaque de la luminaria).

Se debe tomar en cuenta que las lámparas o tubos de una luminaria fluorescente normalmente encienden en pares, es decir que cada dos tubos están conectados a un balastro común, por lo cual, al descomponerse uno de ellos, el otro dejará de encender, por lo que es conveniente verificar su funcionamiento, cambiándolos alternativamente por uno en buen estado.

Los contactos son uno de los dispositivos de mayor uso dentro de la instalación eléctrica, por lo que también requiere de mayor atención para su mantenimiento. Es muy importante para un uso adecuado de los contactos conocer su capacidad en amperios a voltaje de operación de 120 v (ó 220 v según sea el caso). Para su conservación se deben observar las siguientes recomendaciones:

- Verificar en el manual de usuario la potencia requerida por el equipo a ser conectado, con el fin de no rebasar la capacidad del contacto.
- Verificar que las conexiones a las terminales del contacto sean firmes, con el fin de evitar fugas de corriente.
- Verificar que las conexiones tengan colocadas sus tapas exteriores de protección y que se encuentren en buen estado.

Condiciones de iluminación que deben ser mantenidas en las áreas de los establecimientos de salud

Área	Mínimo lux ^{1/} recomendado
Cuarto de esterilización	150 – 300
Servicio higiénico	100 – 150
Banco de sangre	200
Mortuario	100
Cuarto de limpieza	150
Auditorio	300
Consultorio	300
Corredor	150 – 300
Cubículo de tratamiento	100 – 150
Sala de partos	400
Sala de rayos X	20 – 100
Comedor	50
Cuarto de limpieza	150
Hall de entrada	200
Gimnasio para fisioterapia	300
Estación de enfermería (día)	300

Fuente: WHO Regional Publications, Western Pacific Series N° 22. District Health Facilities. Guidelines for development and operations.

1/ Un lux es la iluminación producida por una *candela* (cd) o por una *bujía decimal* (bd) sobre una superficie de 1m² que se encuentra a 1 metro de distancia. Tomar en cuenta que 1 watt equivale a 1,1 bd. Por ejemplo, un foco de 100 watts equivale a 110 cd o bd.

Se recomienda que se realice el encendido del generador eléctrico (grupo electrógeno) por lo menos una vez por semana, así como verificar permanentemente la dotación de reserva de combustible para asegurar la operación ininterrumpida, por lo menos, durante 48 horas. Cada año, se realizará la comprobación del funcionamiento del equipo por un personal especializado, así como la inspección de los anclajes del mismo.

En el caso de los pararrayos, cada año se realizará la comprobación del cabezal, el amarre, los conectores y el tubo de protección del cable conductor, así como la conexión a la toma de tierra. La resistencia de la toma de tierra no debe sobrepasar 10 ohm. En forma periódica, se debe revisar la capacidad de la subestación eléctrica.

Instalaciones sanitarias

Incluyen a las instalaciones de agua y desagüe. Las instalaciones de agua son el conjunto de componentes que transportan el agua potable mediante tuberías (PVC, fierro, galvanizado u otro) desde el inicio de la red de distribución o el medidor y la válvula de flotador en el depósito de almacenamiento, o en el caso de existir depósito, hasta los diferentes puntos de consumo en los ambientes del establecimiento.

Las instalaciones de agua incluyen:

- Tuberías de agua fría y caliente
- Cisterna
- Válvula de control flotador
- Tanque elevado
- Sistemas de bombeo
- Válvulas de diferentes tipos
- Grifos
- Lavatorios y duchas
- Otros elementos que sirven para la conducción del agua potable

Las instalaciones de desagüe son aquellos componentes que recolectan las aguas residuales (aguas jabonosas, grasas y negras) y las conducen a través de una red de tuberías (fierro fundido y/o PVC) hasta las redes municipales.

El mantenimiento de las instalaciones sanitarias se realizará tomando en consideración el tiempo de operación del establecimiento de salud. En caso se detecten problemas, se reemplazarán las tuberías y accesorios dañados, defectuosos o corroídos. Si se detectase una fuga se deberá cambiar la empaquetadura. Cada año, se realizará la comprobación del buen funcionamiento de apertura y cierre de las llaves y se efectuará la comprobación de fugas de agua en los puntos de la red. Cada dos años, un personal especializado realizará la revisión de la instalación en general, la identificación de corrosión en las tuberías, y pruebas de la estanqueidad y presión de funcionamiento.

A continuación, se describen las recomendaciones para el mantenimiento de algunos de los elementos de las instalaciones sanitarias:

- Cisterna: cada mes se efectuará la revisión del funcionamiento de las válvulas, y la limpieza

de la estructura interna una vez al año.

- Tanque de agua: revisión del funcionamiento en forma mensual, y limpieza interna cada año. Revisar que la tapa del tanque esté bien cerrada. En caso de tanques elevados, se deberán verificar el estado de las estructuras.
- Redes de agua dura y blanda: inspección ocular para detectar filtraciones en las tuberías y prueba de apertura y cierre de las válvulas. Cada año, se realizará el pintado y señalización de las tuberías.
- Red de agua caliente: inspección ocular para detectar filtraciones en las tuberías y prueba de apertura y cierre de las válvulas. Además, en forma semestral se revisará el estado de conservación del aislamiento. Tomar en cuenta que el lugar donde esté ubicado el calentador debe estar siempre ventilado.
- Red contra-incendio: inspección ocular para detectar filtraciones en las tuberías y prueba de apertura y cierre de las válvulas. Cada seis meses, se revisarán las mangueras, y una vez al año se pintarán las tuberías.
- Lavatorios y lavaderos: las griferías de agua y desagüe requieren de verificación mensual del funcionamiento; cambio de empaquetaduras en forma semestral; y cambio de grifería y trampas por lo menos una vez por año.
- Inodoros y botaderos clínicos: limpieza con productos químicos en forma semanal, y cambios de componentes en forma semestral.
- Duchas: limpieza de la trampa de sumidero en forma mensual.

Instalaciones especiales

Las centrales de óxido nitroso, de vacío y oxígeno incluyen los siguientes elementos que requieren los cuidados que a continuación se describen:

- Compresoras: limpieza diaria y prueba de comprensión.
- Tanques: prueba de hermeticidad en forma mensual.
- Válvulas: prueba de apertura y cierre en forma diaria.
- Tuberías: prueba de estanqueidad en forma semestral.
- Conexiones: verificación cada seis meses.
- Manómetros: limpieza diaria y control en forma mensual.
- Tablero de comando: verificación de carga diariamente, y la verificación del instrumento de medida en forma mensual.
- Filtros: cambio en forma anual.

Los tanques o bombonas de gases medicinales se deben mantener siempre en posición vertical y protegidas para evitar su desplazamiento en caso de sismo. Las instalaciones de aire comprimido, requieren que se limpien las compresoras y manómetros. Se comprobará la apertura y cierre de las válvulas y verificará la carga del tablero de comando diariamente.

Cada mes, se probará la compresión de las compresoras, la hermeticidad del tanque criogenado y redes de oxígeno, y se hará la verificación del instrumento de medida del tablero de comando. En forma semestral, se revisarán las válvulas, se harán las pruebas de estanqueidad de las tuberías y se verificarán las conexiones.

SUICHES

Los Suiches son otro de los dispositivos de uso frecuente y donde se presenta mayor cantidad de deterioros, por lo cual se requiere realizar las siguientes acciones de prevención:

Verificar que las tapas exteriores de protección estén en buen estado y correctamente colocadas.

Verificar que las conexiones a las terminales sean firmes.

Verificar que la capacidad en amperios sea adecuada a la carga conectada al circuito que controla.

CABLES (CONDUCTORES)

Los cables y sus conexiones son uno de los componentes más importantes de la instalación eléctrica, además de que representan la mayor parte de la misma, aunque curiosamente no se les da mayor importancia ni cuidados, por lo que muchos de los desperfectos de la instalación suelen suceder allí.

Una de las medidas de prevención, para evitar deterioros en este componente es la revisión del aislamiento de los cables en sus tramos terminales, donde se conecta a los dispositivos y equipos (lámparas, apagadores, contactos, balastos, etc.).

Generalmente los materiales aislantes que están deteriorados se endurecen, perdiendo totalmente su capacidad aislante, lo que puede ocasionar descargas y cortos circuitos.

Este endurecimiento ocurre por lo general ante la presencia de conexiones flojas, por lo que debe procederse a eliminar el tramo del conductor con el aislamiento dañado y realizar firmemente la nueva conexión.

Cuando el largo del cable no permite nuevos cortes, se debe proceder a sustituir todo el tramo (recablear) del circuito donde se presenta el deterioro (desde el registro o dispositivo anterior), en ningún caso se debe realizar empalmes o amarres de cable

EXTINTORES

El extintor es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de incendios a presión, de modo que al abrir una válvula el agente sale por una manguera que se debe dirigir a la base del fuego. Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado accidental, el cual debe ser deshabilitado antes de emplear el artefacto.

Según el agente extintor se puede distinguir entre:

- Extintores hídricos cargados con agua y un agente espumógeno, espuma AR-AFFF
Altamente efectivos por su capacidad de potencializar el poder humectante del Agua, los hay biológicamente activos que encapsulan los gases y vapores generados por el fuego rompen las moléculas de los hidrocarburos, inhibiendo la reignición, (flash back), no contaminan el medio ambiente, ni dañan a las personas.
- Extintores de polvo químico seco (multifunción: combatiendo fuegos de clase ABC)
- Extintores de CO₂ (también conocidos como Nieve Carbónica o Anhídrido Carbónico) Fuegos de clase BC.
- Extintores para metales: (únicamente válidos para metales combustibles, como sodio, potasio, magnesio, titanio, etc)
- El mantenimiento de los extintores se debe hacer mínimo cada año, o en su defecto cuando sea utilizado.