

FECHA: 22/03/2026**DATOS GENERALES****Lugar:** DCSNS ☐ SRS ☐ Hospital ☒ CPN ☐***Nombre del lugar:** Hospital Municipal Nuestra Señora del Carmen**Área:** Mantenimiento**Nombre de la Actividad:** Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES**Código POA (Si aplica):****INTRODUCCIÓN**

El mantenimiento hospitalario es crucial para garantizar la seguridad, eficiencia y operatividad de todas las instalaciones y equipos médicos. Este informe presenta los avances realizados, los desafíos encontrados y las acciones correctivas emprendidas en el trimestre Enero/Marzo del 2026.

OBJETIVO DEL INFORME

El Objetivo de este informe es proporcionar un seguimiento detallado del Plan de Mantenimiento Hospitalario implementado en el Hospital Municipal Nuestra Señora Del Carmen.

METODOLOGIA (Si aplica)

Para realizar este informe se recopiló información del plan de mantenimiento 2026 y de los reportes de mantenimientos realizados por los encargados de mantenimiento

DESARROLLO / HALLAZGOS

Durante el trimestre enero-marzo se le dio seguimiento al plan de mantenimiento preventivo correctivo, el cual describimos a continuación.

Iniciamos por darles mantenimiento a las siguientes áreas: equipos médicos en diferentes áreas, mobiliarios y equipos de oficina, quirófanos, Rayos X, aires acondicionados, jardines, infraestructura redes eléctricas, y todas las áreas contempladas en el seguimiento del plan etc.

Las acciones ejecutadas la describimos a continuación:

1. supervisión de funcionamientos de los quirófanos, lámparas quirúrgicas, máquina de anestesia, electrocauterio, aspirador de secreciones, desfibrilador, aires acondicionados y camilla quirúrgica, estos equipos se encuentran todos en un correcto funcionamiento, excepto una lámpara quirúrgica de uno de los quirófanos.
2. Revisión de los aires acondicionados en todas las áreas como son: consultorios, oficinas administrativas, quirófanos, laboratorio, hospitalizaciones y sala de emergencias médicas, aquí podemos resaltar que todos los aires con que contamos está en muy buen funcionamiento.

3. Revisión de todos los equipos médicos, en esta revisión se le hizo una limpieza y prueba de funcionamiento, para verificar que todos están en un correcto funcionamiento, se arreglaron varios nebulizadores los cuales estaban presentando algunos problemas.
4. Revisión de todos los mobiliarios de oficinas, consultorios, salas de esperas, internamientos, etc, en donde se repararon varios bancos de salas de espera, lo cuales estaban flojos y se ajustaron varios archivos.
5. Revisión de la unidad de rayos x máquina de Rayos, mesa de rayos x, en donde se le procedió a reparar un cable de imagen el cual se encuentra en mal estado.
6. Revisión del área de parto, pre-parto, neonatal, esto está todo en perfecto estado, ya que el uso que se le da es muy mínimo.
7. Mantenimiento de la infraestructura: en la infraestructura hemos dado mantenimiento a los drenajes de desechos sólidos, tuberías de agua, departamento de cocina, lavandería, baños, techos, área de jardinería etc.
8. Mantenimiento de los circuitos eléctricos, en donde se han realizado cambios de bombillas, lámparas, tomas corrientes entre otros.
9. Revisión de las habitaciones de internamiento, esta actividad es realizada todo el trimestre, todos los días, ya que siempre hay algo que reparar y se debe de mantener plena observación sobre esta área.
10. Mantenimiento de la Planta Eléctricas, en este mantenimiento se le hizo cambio de aceite, cambio de los filtros y chequeo del circulante de radiador.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

El seguimiento y evaluación del Plan de Mantenimiento Hospitalario durante este período han permitido identificar áreas de mejora y asegurar la continuidad operativa del hospital. Este plan se implementa según la necesidad y según el tiempo programado, el cual depende de factores como el tipo de equipos, el uso, la durabilidad de ciertos equipos entre otros.

RECOMENDACIONES


Se recomienda continuar con las acciones correctivas propuestas y revisar periódicamente el plan de mantenimiento para adaptarse a nuevas necesidades y desafíos.

ANEXOS (Si aplica)

Formularios Control de Calidad de Mantenimiento Preventivo de Equipos

Instrucciones de llenado:

***Indique nombre del lugar:** Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.

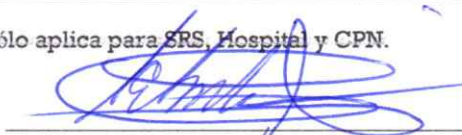
Elaborado por
(Nombre y apellido)





Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-PO-013 - Versión: 01
Fecha de aprobación: 27-03-2013

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
REGIONAL DE SALUD: EL VALLE
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Jairo Torres
PROVINCIA: AZUAY
AREA PERTENECIENTE: MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO: Otacabo
NOMBRE DEL FABRICANTE: Otacabo
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO: Nuevo
AREA INTERVENIDA: Infraestructura

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Charlabio
limpieza y desinfección
y cambio de las baterías
todo en buen estado

OBSERVACIONES

Firma Responsable



Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-PO-013 - Versión: 01
Fecha de aprobación: 27-03-2013

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
REGIONAL DE SALUD: EL VALLE
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Jairo Torres
PROVINCIA: AZUAY
AREA PERTENECIENTE: MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO: Otacabo
NOMBRE DEL FABRICANTE: Otacabo
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO: Nuevo
AREA INTERVENIDA: Infraestructura

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

limpieza de cables, fusibles, revisiones de
baterías, nivel de aceite y rociadores.

OBSERVACIONES

Mantenimiento según horas de uso.

Firma Responsable



Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-PO-013 - Versión: 01
Fecha de aprobación: 27-03-2013

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
REGIONAL DE SALUD: EL VALLE
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Jairo Torres
PROVINCIA: AZUAY
AREA PERTENECIENTE: MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO: Red eléctrica
NOMBRE DEL FABRICANTE: Red eléctrica
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO: Nuevo
AREA INTERVENIDA: Infraestructura

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Cambio y verificación de bombas,
bombillas, transformadores, interruptores,
breakers y UPS.

OBSERVACIONES

Se están cambiando varios luces

Firma Responsable



Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DLC-PO-013 - Versión: 01
Fecha de aprobación: 27-03-2013

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
REGIONAL DE SALUD: EL VALLE
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Jairo Torres
PROVINCIA: AZUAY
AREA PERTENECIENTE: MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCIÓN

NOMBRE DEL EQUIPO: Red eléctrica
NOMBRE DEL FABRICANTE: Red eléctrica
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO: Nuevo
AREA INTERVENIDA: Infraestructura

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Revisión de transformadores en estacion
señales y archiveros.

OBSERVACIONES

Mantenimiento continuo

Firma Responsable





Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
GLOS-FO-013 - Versión 01
Fecha de aprobación: 20-07-2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD: HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
FECHA: 19/01/2022
NOMBRE DEL RESPONSABLE: [Firma] AREA PERTENECIENTE: MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO: [Firma] TIPO O MODELO: [Firma]
NOMBRE DEL FABRICANTE: [Firma] NO. SERIAL: [Firma]
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO: [Firma] Estado: Reparado
AREA INTERVENIDA: [Firma] INFRAESTRUCTURA

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Check general, verificación de partes, limpieza y ajuste de bomba

OBSERVACIONES

Finiso

[Firma] FIRMA RESPONSABLE



Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
GLOS-FO-013 - Versión 01
Fecha de aprobación: 20-07-2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD: HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
FECHA: 19/01/2022
NOMBRE DEL RESPONSABLE: [Firma] AREA PERTENECIENTE: MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO: [Firma] TIPO O MODELO: [Firma]
NOMBRE DEL FABRICANTE: [Firma] NO. SERIAL: [Firma]
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO: [Firma] Estado: Reparado
AREA INTERVENIDA: [Firma] INFRAESTRUCTURA

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Red eléctrica
mantenimiento de todas
las líneas eléctricas en suav
baterías y cables
todo en buen estado

OBSERVACIONES

[Firma] FIRMA RESPONSABLE



Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
GLOS-FO-013 - Versión 01
Fecha de aprobación: 20-07-2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD: HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
FECHA: 19/01/2022
NOMBRE DEL RESPONSABLE: [Firma] AREA PERTENECIENTE: MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO: [Firma] TIPO O MODELO: [Firma]
NOMBRE DEL FABRICANTE: [Firma] NO. SERIAL: [Firma]
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO: [Firma] Estado: Reparado
AREA INTERVENIDA: [Firma] INFRAESTRUCTURA

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Video Caliperakis H01
Limpieza general
de limpieza y ajuste de
cables eléctricos
todo en buen estado

OBSERVACIONES

[Firma] FIRMA RESPONSABLE



Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
GLOS-FO-013 - Versión 01
Fecha de aprobación: 20-07-2021

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO REGIONAL DE SALUD: HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
FECHA: 19/01/2022
NOMBRE DEL RESPONSABLE: [Firma] AREA PERTENECIENTE: MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO: [Firma] TIPO O MODELO: [Firma]
NOMBRE DEL FABRICANTE: [Firma] NO. SERIAL: [Firma]
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO: [Firma] Estado: Reparado
AREA INTERVENIDA: [Firma] INFRAESTRUCTURA

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Limpieza de cable de gas H0
pueda de funcionamiento
chapas de los cables y
con los bombillas

OBSERVACIONES

[Firma] FIRMA RESPONSABLE





Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DGCFO-012 - Versión 01
Fecha de aprobación: 25/03/2017

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
REGIONAL DE SALUD: EL VALLE
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Jairo Jarama
FECHA: 26/03/2017
PROVINCIA: AZUAY
AREA PERTENECIENTE: MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO: Calentador
TIPO O MODELO: No. SERIAL:
NOMBRE DEL FABRICANTE:
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO: Nuevo ☒ Usado ☐ Reparado ☐
AREA INTERVENIDA: INFRAESTRUCTURA

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Calentador HU
Revisión y ajuste de la
temperatura y revisión y
cambio de filtro bacteriológico
Verificación de abastecimiento

OBSERVACIONES

Firma Responsable



Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DGCFO-012 - Versión 01
Fecha de aprobación: 25/03/2017

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
REGIONAL DE SALUD: EL VALLE
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Jairo Jarama
FECHA: 26/03/2017
PROVINCIA: AZUAY
AREA PERTENECIENTE: MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO: Monitor de Sina Vital
TIPO O MODELO: H02
NOMBRE DEL FABRICANTE:
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO: Nuevo ☒ Usado ☐ Reparado ☐
AREA INTERVENIDA: INFRAESTRUCTURA

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Monitor de Sina Vital H02
prueba de funcionamiento
chequeo de los cables y
baterías en buen estado
todo en buen estado

OBSERVACIONES

Firma Responsable



Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DGCFO-012 - Versión 01
Fecha de aprobación: 25/03/2017

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
REGIONAL DE SALUD: EL VALLE
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Jairo Jarama
FECHA: 26/03/2017
PROVINCIA: AZUAY
AREA PERTENECIENTE: MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO: Ballo x
TIPO O MODELO: No. SERIAL:
NOMBRE DEL FABRICANTE:
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO: Nuevo ☒ Usado ☐ Reparado ☐
AREA INTERVENIDA: INFRAESTRUCTURA

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Ballo x:
prueba de funcionamiento
mantenimiento de los
cables mantenimiento
en General

OBSERVACIONES

Firma Responsable



Control de Calidad de Mantenimiento
Preventivo de Equipos
DGCFO-012 - Versión 01
Fecha de aprobación: 25/03/2017

INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
REGIONAL DE SALUD: EL VALLE
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Jairo Jarama
FECHA: 26/03/2017
PROVINCIA: AZUAY
AREA PERTENECIENTE: MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO: Cera de calor radiante
TIPO O MODELO: No. SERIAL:
NOMBRE DEL FABRICANTE:
HISTORIAL MANTENIMIENTO EQUIPO: Nuevo ☒ Usado ☐ Reparado ☐
AREA INTERVENIDA: INFRAESTRUCTURA

DETALLE DEL MANTENIMIENTO

Cera de calor radiante
limpieza general y chequeo
de sus abastecimiento
prueba de funcionamiento

OBSERVACIONES

Firma Responsable



INFORMACIONES GENERALES

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FECHA	26/02/2026
REGIONAL DE SALUD	EL VALLE	PROVINCIA	AZUA
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Jairo Jarama	AREA PERTENECIENTE	MANTENIMIENTO

INFORMACIONES DEL EQUIPO O AREA DE INTERVENCION

NOMBRE DEL EQUIPO	Centrifuga	TIPO O MODELO	
NOMBRE DEL FABRICANTE		NO. SERIAL	
HISTORIA: MANTENIMIENTO EQUIPO	Nuevo ☒ Usado ☐	Reparado ☐	
AREA INTERVENIDA	INFRAESTRUCTURA		

DETALLE DEL MANTENIMIENTO


Centrifuga H1
mantenimiento general y lubricación
del motor, engrase y prueba de
funcionamiento
todo en buen estado


OBSERVACIONES

Jairo Jarama
FIRMA RESPONSABLE





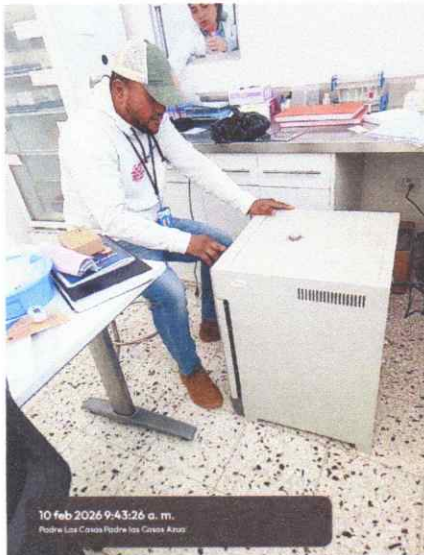

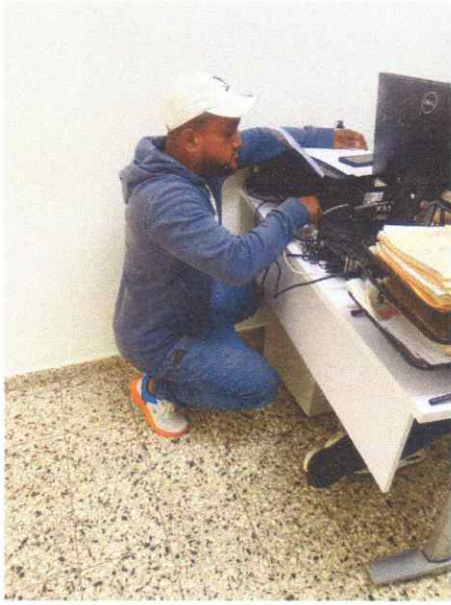

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)		Elementos del Equipo (Medidas Mantenimiento)	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. y Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento o	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Monitores LCD de 12 pulgadas, Total 33		Parte externa y cables eléctricos	Limpieza externa, chequeo de cables eléctrico y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	8/12/2025	8/6/2026					X							X	Todos están en perfecta condiciones.
CPU en Total 33		Parte externa y baterías	Limpieza y mantenimiento general, prueba de baterías y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	8/12/2025	8/6/2026					X							X	Todos están en perfecta condiciones.
UPS Industrial en convertidores total 02		Parte externa y baterías	Limpieza general, prueba de baterías y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	11/12/2025	11/6/2026					X							X	Todos están en perfecta condiciones.
Impresora Multifuncional en total 10		Parte externa, cartuchos, parte eléctrica.	Limpieza general, relleno de cartuchos siempre que sea necesario, verificación de cable eléctricos y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	7/3/2026	7/6/2026		X						X				X	Todos están en perfecta condiciones.
UPS 500 VA en total 29		Parte externa, baterías y conexiones eléctricas	Limpieza general, prueba de baterías, chequeo de partes eléctricas y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	11/12/2025	11/6/2026					X							X	Todos están bien acapio uno que tiene la bacteria dañada
Abanico de pared, pedestal y techo (09)		Parte interna y externa	Limpieza general, engrase, verificación eléctrica, y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	5/12/2025	5/6/2026					X							X	Todos están en perfecta condiciones.
Aires acondicionados de 12 mil btu, 18 mil btu y 36 mil btu, en total 46.		Filtros del ventilador y mantenimiento general.	Limpieza general, Limpieza de los filtros, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	13/12/2025	13/6/2026					X							X	Esta actividad se esta posponiendo para el mes de enero
Autoclave eléctrico (01)		Parte externa.	Limpieza general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	13/12/2025	13/6/2026					X							X	Aun no está en funcionamiento. Pero se le dio su cheque de rutina
Balanza en total 15		Parte externa	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo.	Preventivo	Anual	12/12/2025	12/12/2026												X	Todos están en perfecta condiciones.
Equipos de laboratorio: analizador de muestra, analizador de química, rotador, equipo de química, centrifuga, microscopio, mezcladora		Parte externa.	Limpieza general, chequeo de parte eléctrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	5/12/2025	5/6/2026					X							X	Están bueno en uso.
Aspirador quírujico en total 04 unidades		Parte externa	Revisión general, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de patinetas y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	5/12/2025	5/6/2026						X							Están bueno en uso.
Bebederos en total 03 unidades		parte externa	verificación del funcionamiento de las llaves, verificación de parte eléctrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	4/12/2025	4/6/2026					X							X	Están bueno en uso.
Bomba de agua 01 unidad		Chequeo general	Prueba de funcionamiento, verificación del OK, verificación de la parte eléctrica.	Preventivo	Semestral	13/12/2025	13/6/2026					X							X	Esta buena en uso.
Camilla Ginecológica 01 unidad		Parte externa	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas.	Preventivo	Anual	5/12/2025	5/12/2026												X	Buena en uso
Compresor de Aire 01 unidad		Parte interna e externa	Calibración de presión, chequeo fuga deaire, calibración apagado y encendido automático.	Preventivo	Trimestral	14/3/2026	14/6/2026		X			X							X	Bueno en uso
Desbridador en total 03 unidades.		Parte interna y externa	Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, chequeo de la fuente de alimentación, ajuste, verificación de desbridación síncrona, revisión kit batería, Prueba del cable eléctrico, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	12/3/2026	12/6/2026		X			X							X	Bueno en uso
Electrobrújula 01 unidad		Parte externa	Limpieza general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	12/3/2026	12/6/2026		X			X							X	Bueno en uso
Electrocardiógrafo en total 04 unidades		Parte externa	Mantenimiento general, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Semestral	12/12/2025	12/06/2026					X							X	Bueno en uso
Electrocauterio 02 unidades		Cable eléctrico y conectores	Verificación de los cable eléctrico y de los conectores.	Preventivo	Trimestral	12/3/2026	12/6/2026			X					X				X	Bueno en uso

Equipo de Rayos x (01)	Parte eléctrica, parte mecánica y máquina reveladora	Verificación de la reveladora poniéndose en posición "OFF". Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, chequeo del interruptor de disparo, verificación línea de tensión, limpieza general y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	5/3/2026	5/9/2026	X											Bueno en uso
Esfigmomanómetro de pared (ypedestal) (10)	Parte externa	Chequeo general, verificación de perla, brazalete y tubo de conexión.	Preventivo/ Correctivo	Manual	13/3/2026	13/4/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Horno esterilizador mediano, 03 unidad	parte externa	Chequeo de conexiones eléctricas, limpieza general.	preventivo	Semestral	3/12/2025	3/6/2026				X							X	Bueno en uso
Estufa Industrial, 02 unidades	Tipetas, horno, hornillas.	Verificación de las llaves del gas, limpiezas de las hornillas, chequeo del horno y limpieza general.	preventivo	Trimestral	3/2/2026	3/6/2026	X			X							X	Bueno en uso
Fritzer exhibidor parado, marca Farco, 02 unidad	Parte interna y externa	Mantenimiento general, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	13/12/2025	13/6/2026						X					X	Bueno en uso
Inchadora (04)	Parte externa e interna	Revisión y ajuste de temperatura, Revisión y cambio de filtro bacteriológico, Verificación de alarmas, Calibración general y Limpieza general.	Preventivo	Trimestral	12/3/2026	12/6/2026			X								X	Bueno en uso
Lámpara cuello de ganso (06)	Parte eléctrica y bombilla	Verificación de en la parte eléctrica y verificar las bombilla.	Preventivo/ Correctivo	Manual	4/3/2025	4/4/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Cuna de color radiante	Parte externa	Limpieza general, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	4/3/2026	4/6/2026		X									X	Bueno en uso
Lámpara de fototerapia (02)	Parte eléctrica	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento	Preventivo	Manual	4/3/2026	4/4/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Lámpara Quirúrgica Movi y satelital (03)	Parte eléctrica y bacteria	Verificación de las lámparas, verificación eléctrica, prueba de bacteria y prueba de funcionamiento	Preventivo	Manual	12/3/2026	12/4/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Máquina de anestesia 02 unidades	Parte externa Oxígeno, máquinas	Verificación del oxígeno, verificación de las mangueras, verificación eléctrica, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	5/3/2026	5/6/2026		X									X	Bueno en uso
Mesa de parto eléctrica (01)	Parte externa	Limpieza general, engrase, chequeo eléctrico y prueba de funcionamiento.	Preventivo	Semestral	4/12/2025	4/6/2026							X				X	Bueno en uso
Lavadoras y secadora en el área de lavandería (03)	Parte interna y externa	Chequeo de conductos de agua, verificación de las correas, verificación de la parte eléctrica, limpieza general y prueba de funcionamiento	Preventivo/ Correctivo	Semestral	6/12/2025	6/6/2026							X				X	Bueno en uso
Licudadora industrial (01)	motor	Limpieza General, verificación eléctrica, chequeo del rotor, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Annual	7/12/2025	7/12/2026											X	Bueno en uso
Monitor de signos vitales (12)	Parte externa	Chequeo de batería, chequeo de partes electrónicas, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Preventivo	Trimestral	12/3/2026	12/6/2026		X					X				X	Bueno en uso
Monitor fetal en total 02 unidades	Parte externa	Chequeo partes electrónicas, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores	Preventivo	Trimestral	12/3/2026	12/6/2026		X					X				X	Bueno en uso
Nebulizador en total 06 unidades	Parte interna y externa	Limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones 0 ruido, verificación eléctrica y prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	1/3/2026	1/4/2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Bueno en uso
Megascopio en total 15	lámparas, interruptores y cable	Chequeo lámpara fluorescente 20w, interruptor de encendido, cable eléctrico.	Preventivo	Trimestral	13/3/2026	13/6/2026		X					X				X	Bueno en uso
Chisocopio	Limpieza general	Limpieza y desinfección, cambio de baterías.	preventivo	Trimestral	13/3/2026	13/6/2026		X					X				X	Bueno en uso

[illegible]