

















MAQUINA DE HEMOGRAMA	LABORATORIO CLINICO	Limpieza, mantenimiento general, rastreo y limpieza de manguera de diluyente internamente, comprobación de (startus), calibración, lubricación de motor de jeringa y limpieza de sensor de ieringa Comida de	Preventivo	Trimestral	23/06/2023	23/09/2023				x				x					
NEVERA	LABORATORIO CLINICO	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	Preventivo	Trimestral	28/06/2023	28/09/2023				x				x					
ROTADOR DE VDRL	LABORATORIO CLINICO	Limpieza superficialmente el equipo secándolo después con un paño seco. Si tiene manchas, utilice un poco de detergente con un paño ligeramente humedecido con agua. Si el material antideslizante de la plataforma puede quitarse hágalo y lávelo. Verifique el funcionamiento de las partes mecánicas del equipo: Plataforma, ejes y engranajes, lubrique si es necesario. Verifique los controles de velocidad y de tiempo para determinar si se encuentra dando los tiempos y velocidades fijados. Revise la alimentación eléctrica del equipo para limpieza integral externa e interna del equipo.	Preventivo	Trimestral	22/06/2023	22/09/2023				x				x					
COLORIMETRO	LABORATORIO CLINICO	Revisión y limpieza de sistema electrónico (tarjetas electrónicas, cableado, contactos, teclado, display). Revisión y	Preventivo	Trimestral	15/06/2023	15/09/2023				x				x					
EQUIPO DE QUIMICA BS-200	LABORATORIO CLINICO	Prueba de funcionamiento, chequeo sistema óptico, chequeo filtros, chequeo lamp. Halógena, limpieza, mantenimiento general.	Preventivo	Trimestral	14/06/2023	14/09/2023				x				x					
MICROSCOPIO (2)	LABORATORIO CLINICO	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	12/06/2023	12/09/2023				x				x					
CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	LABORATORIO CLINICO	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración	Preventivo	Trimestral	10/06/2023	10/09/2023				x				x					
(2) AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	LABORATORIO CLINICO	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	05/06/2023	05/09/2023				x				x					
(3) PIPETAS AUTOMATICAS	LABORATORIO CLINICO	Verificación sistema de succión, verificación sistema calibración de micro litros, limpieza y lavado general	Preventivo	Trimestral	04/06/2023	04/09/2023				x				x					
MICROSCOPIO DE 2 LENTES Y 4 FOCOS	BACILOSCOPIA	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	01/06/2023	01/09/2023				x				x					
ASPIRADORES	CUARTO CRITICO	revisión general, verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras. Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	07/06/2023	07/09/2023				x				x					
DESFRILADOR PT 9000 B	CUARTO CRITICO	Revisión de componentes, Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, Reparación fuente de alimentación, Ajuste printer calibración térmico ( SI REQUIERE), Verificación de desfibrilación sincrónica, Revisión kit baterías, Prueba del cable de	Preventivo	Trimestral	23/06/2023	23/09/2023				x				x					
MONITOR	CUARTO CRITICO	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores.	Preventivo	Trimestral	18/06/2023	18/09/2023				x				x					



ELECTROCARDIOGRAMA	CUARTO CRITICO	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza y mantenimiento electrodos de succión, chequeo parámetros mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en el equipo.	Preventivo	Trimestral	19/06/2023	19/09/2023			x			x			
NEBULIZADOR	CUARTO CRITICO	Mantenimiento general, Cambio de bombillo (si requiere), Cambio de baterías (si es necesario), Ajuste y limpieza general, mantenimiento general, Cambio de bombillo (si requiere), Cambio de baterías (si es necesario), Ajuste y limpieza general, Comprobación funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	14/06/2023	14/09/2023			x			x			
EQUIPO DE LARINGOSCOPIA	CUARTO CRITICO	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y mantenimiento preventivo.	Preventivo	Trimestral	29/06/2023	29/09/2023			x			x			
LARINGOSCOPIO	CUARTO CRITICO	Evite que la suciedad, polvo, sangre, solución de control o agua ingresen al glucómetro a través del puerto de prueba o del puerto de datos, Almacene el glucómetro, las tiras reactivas y la solución de control en el estuche después de cada uso, en un lugar fresco y seco, No los refrigere. Utilice un paño humedecido con solución de control.	Preventivo	Trimestral	21/06/2023				x			x			
MONITOR	CUARTO CRITICO	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores	Preventivo	Trimestral	03/06/2023	03/09/2023			x			x			
GLUCOMETRO	CUARTO CRITICO	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general.	Preventivo	Trimestral	08/06/2023	08/09/2023			x			x			
MONITOR	Quirofano	Revisión y arreglo de perillas, Limpieza general interna, Revisión y arreglo de display, Limpieza general externa, Revisión de cable de energía y fusibles, Prueba de alarmas y conector de placas, Verificación de funcionamiento, con pedal y lápiz, Verificación de funcionamiento con cable y mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de revisión general, verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeo de activar e interruptor manual y el interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF", Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, Descargar los tres tanques recuperando los líquidos en contenedores.	Preventivo	Trimestral	13/06/2023	13/09/2023			x			x			
ASPIRADOR	Quirofano	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general.	Preventivo	Trimestral	04/06/2023	04/09/2023			x			x			
CAUTERIO	Quirofano	Revisión y arreglo de perillas, Limpieza general interna, Revisión y arreglo de display, Limpieza general externa, Revisión de cable de energía y fusibles, Prueba de alarmas y conector de placas, Verificación de funcionamiento, con pedal y lápiz, Verificación de funcionamiento con cable y mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de revisión general, verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeo de activar e interruptor manual y el interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF", Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, Descargar los tres tanques recuperando los líquidos en contenedores.	Preventivo	Trimestral	02/02/2023	02/05/2023			x			x			
MESA DE CIRUGIA	Quirofano	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeo de activar e interruptor manual y el interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF", Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, Descargar los tres tanques recuperando los líquidos en contenedores.	Preventivo	Trimestral	15/02/2023	15/05/2023			x			x			
ASPIRADOR DE CIRUGIA	CIRUGIA 2	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeo de activar e interruptor manual y el interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF", Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, Descargar los tres tanques recuperando los líquidos en contenedores.	Preventivo	Trimestral	10/03/2023	10/06/2023			x			x			
RAYOS X PORTATIL	RAYOS X	Desactivar e interruptor manual y el interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF", Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, Descargar los tres tanques recuperando los líquidos en contenedores.	Preventivo	Trimestral	15/01/2023	15/04/2023			x			x			
MAQUINA REVELADORA	RAYOS X	Desactivar e interruptor manual y el interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF", Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, Descargar los tres tanques recuperando los líquidos en contenedores.	Preventivo	Trimestral	10/01/2023	11/04/2023			x			x			



AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	RAYOS X	Los cross-over que conectan los 4 racks, Extraer los 4 racks de la reveladora, Limpiar y lavar cuidadosamente los tanques, Limpiar y lavar a fondo los racks del revelador, fijador y agua, así como todos los "cross-over", Limpiar con una esponja húmeda los rodillos y las guías de la secadora, Descargar los contenedores de regeneración y lavarlos Cuidadosamente, Sustituir el filtro del ventilador de la	Preventivo	Trimestral	11/01/2023	11/04/2023	x				x						
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	RAYOS X	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	12/01/2023	12/04/2023	x				x						
NEBULIZADOR	ALMACEN DE FARMACIA	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido	Preventivo	Trimestral	12/01/2023	12/04/2023	x				x						
NEGATOSCOPIO	CONSEJERIA	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable ac, Mantenimiento preventivo.	Preventivo	Trimestral	12/01/2023	12/04/2023	x				x						
APARATO PARA EXAMINAR OIDOS	Auriologia	Limpieza y desinfección. Cambio de las baterías, asegurándose de que no haya signos de corrosión u oxidación. Siempre reemplace AMBAS pilas. Se recomiendan baterías alcalinas. Retire las baterías del	Preventivo	Trimestral	15/01/2023	15/04/2023	x				x						
SONOGRAFO	SONOGRAFO	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y Mantenimiento preventivo.	Preventivo	Trimestral	18/01/2023	18/04/2023	x				x						
ELECTROCARDIOGRAMA	ELECTRO	Mantenimiento general, Verificación de componentes y perifericos, Calibración General, Cambio juego de chupas ( si requiere), Juego de Electrodo para extremidades (si es necesario), Calibración, ajuste y limpieza general	Preventivo	Trimestral	18/01/2023	18/04/2023	x				x						
NEBULIZADOR	SALA DE PEDIATRIA # 1	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del	Preventivo	Trimestral	18/01/2023	18/04/2023	x				x						
NEBULIZADOR	REHIDRATACION ORAL	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	20/01/2023	20/04/2023	x				x						
AIRE ACONDICIONADO AMERINAN 12 INVERTER	DIRECCION	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	20/01/2023	20/04/2023	x				x						
AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU	SUB-DIRECCION	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	20/01/2023	20/04/2023	x				x						
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	CUARTO MEDICO	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	20/01/2023	20/04/2023	x				x						
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	ADMINISTRACION	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	23/02/2023	23/05/2023				x			x				
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	Auditorio	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	23/02/2023	23/05/2023			x				x				
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	RECURSOS HUMANOS	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	23/02/2023	23/05/2023			x				x				
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	ESTADISTICA	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	23/02/2023	23/05/2023			x				x				
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	FARMACIA	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento	Preventivo	Trimestral	23/02/2023	23/05/2023			x				x				
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	ALMACEN DE FARMACIA	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	23/02/2023	23/05/2023			x				x				




AIRE ACONDICIONADO AMERINAN 12 INVERTER	FACTURACION	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	23/02/2023	23/05/2023		x			x						
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	CONSEJERIA	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	23/02/2023	23/05/2023		x			x						
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	ODONTOLOGIA	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	31/01/2023	29/04/2023	x				x						
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	SONOGRAFIA	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	31/01/2023	29/04/2023	x				x						
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	ENFERMERIA	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	31/01/2023	29/04/2023	x				x						
AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU	DESCANSO DE CIRUJANOS	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	31/01/2023	29/04/2023	x				x						
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	PRIVADO #1	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	31/01/2023	29/04/2023	x				x						
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	PRIVADO #2	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	31/01/2023	29/04/2023	x				x						
AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	PRIVADO DE DENGUE	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	31/01/2023	29/04/2023	x				x						
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	Quirofano	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	07/02/2023	07/05/2023		x			x						
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	CIRUGIA MENOR	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	07/02/2023	07/05/2023		x			x						
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	AREA DE PREPARAR MATERIAL	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	07/02/2023	07/05/2023		x			x						
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	SALA DE ESPERA	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Preventivo	Trimestral	07/03/2023	07/06/2023				x				x			







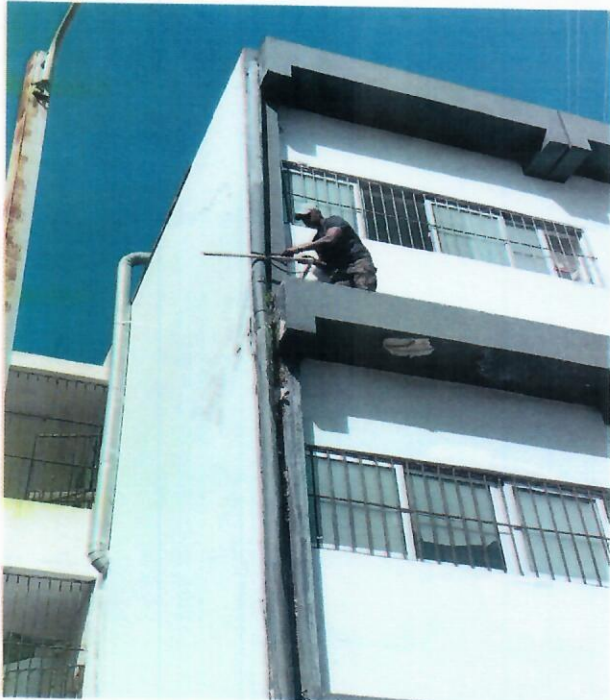







# HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN LORENZO DE LOS MINA

## CRONOGRAMA PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO

2023  
Santo Domingo



*[Handwritten signature]*



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
PLANTA ELÉCTRICA DIÉSEL DE 500 KVA	BLOQUE A	BUENO	DIARIO	Todo el año	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cambio filtro de aceite.</li> <li>b) Limpieza de polos de baterías/suministro de agua de batería.</li> <li>c) Cambiar el elemento anticorrosivo del agua.</li> <li>d) Cambio de los filtros de combustible.</li> <li>e) Cambio de aceite.</li> <li>f) Mantenimiento preventivo en general.</li> <li>g) Limpieza y el protocolo correspondiente según propuesta y contrato.</li> </ul>	<b>HMISLLM Electricista</b>
Planta Eléctrica Caterpillar de 500 kva	Bloque b	BUENO	Diario	Todo el año	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Cambio filtro de aceite.</li> <li>b) Limpieza de polos de baterías/suministro de agua de batería.</li> <li>c) Cambiar el elemento anticorrosivo del agua.</li> <li>d) Cambio de los filtros de combustible.</li> <li>e) Cambio de aceite</li> <li>f) Mantenimiento preventivo en general.</li> <li>g) Limpieza y el protocolo correspondiente según propuesta y contrato</li> </ul>	<b>HMISLLM Electricista</b>
Subestación eléctrica	Bloque a	BUENO	Mensual	Enero 2023 Febrero 2023 Marzo 2023 Abril 2023 Mayo 2023 Junio 2023 Julio 2023 Agosto 2023 Septiembre 2023 Octubre 2023 Noviembre 2023 Diciembre 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) cambio filtro de aceite.</li> <li>b) Limpieza de polos de baterías/suministro de agua de batería.</li> <li>c) Cambiar el elemento anticorrosivo del agua.</li> <li>d) Cambio de los filtros de combustible.</li> <li>e) Cambio de aceite.</li> <li>f) Mantenimiento preventivo en general, limpieza y el protocolo correspondiente según propuesta y contrato.</li> </ul>	<b>HMISLLM Electricista</b>
Mantenimiento de red eléctrica	Segundo nivel	BUENO	Diario	Todo el año	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Inspección de cuartos eléctricos.</li> <li>b) Cambio de tubos fluorescentes y lámparas.</li> <li>c) Inspecciones de tomas corrientes e interruptoras, cambio si requiere y revisión en general.</li> </ul>	<b>HMISLLM Electricista</b>

Mantenimiento de red eléctrica	tercer nivel	BUENO	Mensual	Enero 2023 Febrero 2023 Marzo 2023 Abril 2023 Mayo 2023 Junio 2023 Julio 2023 Agosto 2023 Septiembre 2023 Octubre2023 Noviembre 2023 Diciembre 2023	Cambio de tubos fluorescentes y lámparas. a) Inspección de cuartos eléctricos. b) Inspección de toma corriente e interruptora. c) Cambio si requiere y revisión en general.	HMISLLM Electricista
Mantenimiento De Infraestructura Y Planta Física	Bloque A	Bueno	Mensual	Enero 2023 Febrero 2023 Marzo 2023 Abril 2023 Mayo 2023 Junio 2023 Julio 2023 Agosto 2023 Septiembre 2023 Octubre2023 Noviembre 2023 Diciembre 2023	a. Revestimiento De Paredes b. Revestimiento De Piso Con Resina Epoxi. c. Resane De Paredes d. Corrección De Fisura En Techo	Pintor Y Albañil HMISLLM Electricista
Mantenimiento De Infraestructura Y Planta Física	Bloque B	Bueno	Mensual	Enero 2023 Febrero 2023 Marzo 2023 Abril 2023 Mayo 2023 Junio 2023 Julio 2023 Agosto 2023 Septiembre 2023 Octubre2023 Noviembre 2023 Diciembre 2023	a) Revestimiento De Paredes b) Revestimiento De Piso Con Resina Epoxi c) Resane De Paredes d) Corrección De Fisura En Techo	Pintor Y Albañil HMISLLM Electricista
Acondicionador de aire ductiable 5 ton R-410	Planta Física Bloque A Y B	Bueno	Diario/Semana I/Mensual	Todo el Año	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos



Acondicionador de arie Split de 12-18-24 y 36 Btu	Planta Física Bloque A Y B	Bueno	Diario/Semana I/Mensual	Todo el Año	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos
Acondicionador de arie tipo VRF 15 ton R-410	Planta Física Bloque A Y B	Bueno	Diario/Semana I/Mensual	Todo el Año	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos
Acondicionador de arie tipo Paquete 10 ton R-410	Planta Física Bloque A Y B	Bueno	Diario/Semana I/Mensual	Todo el Año	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos
Aire Acondicionado Mirage 18000btu	Planta Física Bloque A Y B	Bueno	Diario/Semana I/Mensual	Todo el Año	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento, reparación e inspección de ductos, cambio e insulación de tubería de cobre.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos
Nevera	Vacunación	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2023	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos
Nevera Panorámica	Farmacia	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2023	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos
Nevera	Odontología	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2023	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos
Nevera	Farmacia	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2023	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Técnico De Refrigeración Y Eléctricos

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Otoscopio	Emergencia	Bueno	Trimestral	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza y desinfección. Cambio de las baterías, asegurándose de que no haya signos de corrosión u oxidación. Siempre reemplace AMBAS pilas. Se recomiendan baterías alcalinas. Retire las baterías del mango si el instrumento no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
Nevera De Gas	Vacunación	Bueno	Trimestral	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
Balanza Pediátrica	Vacunación	Bueno	Trimestral	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
Lavadora LG Motor Smart Inverter	Aseo general	Bueno	Semestral	Junio-Diciembre 2023	Revisión General, limpieza, carga de gas, revisión de sistema eléctrico y lubricación de todo el equipo - Verificar funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
Ambulancia OJZ-593	Parqueo	Bueno	Mensual	Enero 2023 Febrero 2023 Marzo 2023 Abril 2023 Mayo 2023 Junio 2023 Julio 2023 Agosto 2023 Septiembre 2023 Octubre 2023 Noviembre 2023 Diciembre 2023	Cambio de aceite de motor cada 5000 kilómetros, alineación y balanceo mensual, rotación de llantas, engrase general, cambio de pastillas, cambio de llantas., cambio de líquidos en general, tensión de frenos, engrases de rodamientos, cambio de batería, cambio de bandas. Cambio de pastillas, ajuste de carrocería., cambio de líquidos en general, cambio de correas, sincronización, cambio de discos delanteros. y demás mantenimiento que se requiera anula.	Chofer Y Mecánico Por Contratar
ALMACEN	Mantenimiento	Bueno	Mensual	Enero 2023 Febrero 2023 Marzo 2023 Abril 2023 Mayo 2023 Junio 2023 Julio 2023 Agosto 2023 Septiembre 2023 Octubre 2023 Nov./ Dic. 2023	Revisión y verificación de las piezas mecánicas - Verificación del voltaje de alimentación y del sistema electrónico - Verificación del estado del tablero digital	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Incubadora	Pre-Parto	Bueno	Trimestral	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Verificación de componentes , Revisión de motor, Revisión termostato control RPM, Inspección de la cúpula y seguros puertas , Verificación y comprobación del panel frontal, Revisión de la tarjeta mother board ,Cambio termostato control de temperatura ( si requiere), Revisión y ajuste de temperatura , Revisión y cambio de filtro bacteriológico , Verificación de alarmas , Reemplazo de batería (si es necesario) , Juego de mangas (si es necesario) , Calibración general , Limpieza general , Test de funcionamiento	<b>Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina</b>
Aspirador (2)	Pre-Parto	Bueno	Trimestral	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	<b>Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina</b>
Camilla Ginecologica	Pre-Parto	Bueno	Trimestral	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza general, lubricación y engrase de partes mecánicas, prueba de funcionamiento.	<b>Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina</b>

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Aire Acondicionado Tipo Spleet	Pre-Parto	Bueno	Trimestral	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
(2) Lampara Cuello De Ganso	Pre-Parto	Bueno	Trimestral	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Comprobación alimentación eléctrica, Cambio de cable alimentación AC ( si requiere), Cambio de portalámpara ( si requiere), Cambio portabombillos ( si requiere), Reemplazo bombillo halogeno ( de ser necesario), Cambio bombillo corriente ( si requiere), Reparación fuente alimentación ( si requiere), Cromado general (si es necesario), Cambio interruptor encendido (si es necesario), Limpieza y ajuste general, Comprobación de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
Balanza Pediatrica	Pre-Parto	Bueno	Trimestral	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Lubricación, calibración regulador de peso, prueba de funcionamiento, limpieza del equipo	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
Unidad Odontologica	Consultorio Odontologico	Bueno	Trimestral	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Prueba de funcionamiento, mantenimiento general, chequeo de fugas (agua aire), chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
Compresor De Aire	Consultorio Odontologico	Bueno	Trimestral	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Calibración de presión, chequeo fuga de aire, calibración apagado y encendido automático, verificación línea de tensión 110volt.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
Nevera	Consultorio Odontologico	Bueno	Trimestral	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
Amargamador	Consultorio Odontologico	Bueno	Trimestral	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpie el equipo con un trapo húmedo y detergente suave, Verifique que realice un correcto encendido y apagado levantando la puerta de seguridad al dar la orden de inicio, Evalúe el sonido producido, Efectuar inspección de condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, Verificar contactos de la tarjeta electrónica, Revisión y lubricación del motor, Verificación de estado de funcionamiento de microswitch, Inspeccionar los sostenedores de cápsula y sus amortiguadores, Chequear si el temporizador cumple los tiempos prefijados.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
Horno Esterilizador	Consultorio Odontologico	Bueno	Trimestral	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Se realiza limpieza del equipo, Revisión de voltaje de red y polo tierra, Revisión del regulador, controlador o termostato mecánico, según sea el caso, Limpieza de la tarjeta electrónica y componentes eléctricos, Realizar la prueba de funcionamiento del equipo haciendo tomas de temperatura en 5 puntos diferentes y en diferentes tiempos con una termocupla (Fluke), Verificación de temperatura ambiente interna durante 24h. Revisar temperatura y humedad ambiente externa con patrón calibrado, Verificar integridad y funcionamiento de sensor de control.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
(3) MICROSCOPIO DE 2 LENTES Y 4 FOCOS	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
MICROCENTRIFUGA (3)	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
MICRO CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
MICROSCOPIO	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
CENTRIFUGA DE 6 TUBOS (2)	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
MAQUINA DE HEMOGRAMA	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza, mantenimiento general, rastreo y limpieza de manguera de diluyente internamente, comprobación de (startus), calibración, lubricación de motor de jeringa y limpieza de sensor de jeringa Comida de muestras.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
NEVERA	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento, regulación de temperatura.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
ROTADOR DE VDRL	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpiar superficialmente el equipo secándolo después con un paño seco. Si tiene manchas, utilice un poco de detergente con un paño ligeramente humedecido con agua. Si el material antideslizante de la plataforma puede quitarse hágalo y lávelo, Verifique el funcionamiento de las partes mecánicas del equipo: Plataforma, ejes y engranajes, lubrique si es necesario, Verifique los controles de velocidad y de tiempo para determinar si se encuentra dando los tiempos y velocidades fijados, Revise la alimentación eléctrica del equipo para detectar posibles peladuras, cortes o degradación del material aislante del conductor, Importante que cuando tenga un problema con el equipo lo reporte de inmediato al Departamento de Mantenimiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
COLORIMETRO	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza integral externa e interna del equipo, Revisión y limpieza de sistema electrónico (tarjetas electrónicas, cableado, contactos, teclado, display), Revisión y limpieza cámara porta-muestras, Verificación de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
EQUIPO DE QUIMICA BS-200	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Prueba de funcionamiento, chequeo sistema óptico, chequeo filtros, chequeo lamp. Halógena, limpieza, mantenimiento general.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
MICROSCOPIO (2)	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
CENTRIFUGA DE 24 TUBOS	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Mantenimiento general, limpieza del equipo, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso, calibración r.p.m.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
(2) AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
(3) PIPETAS AUTOMATICAS	LABORATORIO CLINICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Verificación sistema de succión, verificación sistema calibración de micro litros, limpieza y lavado general.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
MICROSCOPIO DE 2 LENTES Y 4 FOCOS	BACILOSCOPIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza de lentes, oculares, prismas, objetivos, diafragma, chequeo regulador de voltaje e interruptor de encendido, prueba de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
ASPIRADORES	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
DESFRILADOR PT 9000 B	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Revisión de componentes, Verificación de paletas, Limpieza e inspección de paletas, Inspección de panel frontal, Reparación fuente de alimentación, Ajuste printer calibración térmico ( SI REQUIERE), Verificación de desfibrilación sincrónica, Revisión kit baterías, Prueba del cable de paciente, Limpieza y ajuste general, Ajuste del armazón.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
MONITOR	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y mantenimiento preventivo	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
ELECTROCARDIOGRAMA	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza y mantenimiento electrodos de succión, chequeo parámetros	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
NEBULIZADOR	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
EQUIPO DE LARINGOSCOPIA	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Mantenimiento general, Cambio de bombillo (si requiere), Cambio de baterías (si es necesario), Ajuste y limpieza general, Comprobación funcionamiento	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
LARINGOSCOPIO	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Mantenimiento general, Cambio de bombillo (si requiere), Cambio de baterías (si es necesario), Ajuste y limpieza general, Comprobación funcionamiento	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
MONITOR	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y mantenimiento preventivo	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
GLUCOMETRO	CUARTO CRITICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Evite que la suciedad, polvo, sangre, solución de control o agua ingresen al glucómetro a través del puerto de prueba o del puerto de datos, Almacene el glucómetro, las tiras reactivas y la solución de control en el estuche después de cada uso, en un lugar fresco y seco, No los refrigere, Utilice un paño humedecido con agua y detergente suave para limpiar el exterior del glucómetro.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERILIZACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Chequeo fuga de corriente, verificación de resistencias calentadoras, limpieza general.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
MONITOR	CIRUGIA 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y mantenimiento preventivo	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
ASPIRADOR	CIRUGIA 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
CAUTERIO	CIRUGIA 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Revisión y arreglo de perillas, Limpieza general interna, Revisión y arreglo de display, Limpieza general externa, Revisión de cable de energía y fusibles, Prueba de alarmas y conector de placas, Verificación de funcionamiento, con pedal y lápiz, Verificación de funcionamiento con cable y pinza bipolar.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
MESA DE CIRUGIA	CIRUGIA 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
ASPIRADOR	CIRUGIA 2	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	<b>Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina</b>
MESA DE CIRUGIA	CIRUGIA 2	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de funcionamiento.	<b>Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina</b>
ASPIRADOR DE CIRUGIA	CIRUGIA 2	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección de vaso recolector, Calibración y limpieza general, Prueba de funcionamiento.	<b>Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina</b>
MESA DE CIRUGIA	CIRUGIA MENOR	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Mantenimiento preventivo en general, Verificación de posiciones, Engrase de piñonería, Inspección de hidráulico, Cambio de hidráulico, Verificación de frenos, Limpieza y ajuste general, Test de funcionamiento.	<b>Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina</b>



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
RAYOS X PORTATIL	RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Verificación funcionamiento de las placas de retención, chequeo interruptor de disparo, verificación línea de tensión, chequeo selectores de kv , amp.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
MAQUINA REVELADORA	RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Desactivar el interruptor mural y el interruptor general de la reveladora poniéndose en posición "OFF", Quitar la tapa y los paneles laterales de la reveladora, Descargar los tres tanques recuperando los líquidos en contenedores adecuados, Quitar los "cross-over" que conectan los 4 racks, Extraer los 4 racks de la reveladora, Limpiar y lavar cuidadosamente los tanques, Limpiar y lavar a fondo los racks del revelador, fijador y agua, así como todos los "cross-over", Limpiar con una esponja húmeda los rodillos y las guías de la secadora, Descargar los contenedores de regeneración y lavarlos Cuidadosamente, Sustituir el filtro del ventilador de la secadora, Recolocar racks y "cross-over" en la reveladora.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	RAYOS X	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
NEGATOSCOPIO	YESO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable ac, Mantenimiento preventivo.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
NEBULIZADOR	ALMACEN DE FARMACIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
NEGATOSCOPIO	CONSEJERIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Chequeo lámpara fluorescente 20w, Interruptor de encendido, cable ac, Mantenimiento preventivo.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
APARATO PARA EXAMINAR OIDOS	CONSEJERIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza y desinfección. Cambio de las baterías, asegurándose de que no haya signos de corrosión u oxidación. Siempre reemplace AMBAS pilas. Se recomiendan baterías alcalinas. Retire las baterías del mango si el instrumento no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina



DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
SONOGRAFO	SONOGRAFIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza transductores y Mantenimiento preventivo.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
ELECTROCARDIOGRAMA	ELECTRO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Mantenimiento general, Verificación de componentes y perisfericos, Calibración General, Cambio juego de chupas ( si requiere), Juego de Electrodo para extremidades (si es necesario), Calibración, ajuste y limpieza general	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
NEBULIZADOR	SALA DE PEDIATRIA # 1	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
APARATO DE OFTALMOLOGIA	DERMATOLOGIA	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Mantenimiento general, Verificación de componentes y perisfericos, Calibración General, Calibración, ajuste y limpieza general	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
NEBULIZADOR	REHIDRATAACION ORAL	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Mantenimiento general, limpieza del equipo, cambio de filtro, lubricación del motor, engrase, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina

DESCRIPCION	LOCALIZACION	ESTADO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
AIRE ACONDICIONADO AMERINAN 12 INVERTER	DIRECCION (ENCARGADA)	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
AIRE DE VENTANA DE 24000 BTU	SUB-DIRECCION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	CUARTO MEDICO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	ADMINISTRACION	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina
AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLEET	SALON DE ACTO	BUENO	TRIMESTRAL	Marzo 2023 Junio 2023 Septiembre 2023 Diciembre 2023	Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.	Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina