

ACTIVIDAD:

Seguimiento al plan de mantenimiento de preventivo en el EES

CODIGO:

HMVF 4.1.1.4.02

PRODUCTO:

Implementación del plan mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura

FECHA:

03/2024

FECHA: 27/03/2024

DATOS GENERALES

Lugar: DCSNS SRS Hospital CPN

***Nombre del lugar:** HOSPITAL MUNICIPAL VILLA FUNDACION

Área: MANTENIMIENTO

Nombre de la Actividad: SEGUIMIENTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL EES

Código POA (Si aplica): HMFV 4.1.1.4.02

INTRODUCCIÓN

El presente informe proporciona un resumen del seguimiento realizado al programa de mantenimiento preventivo en el Equipamiento y de infraestructura del Hospital Municipal Villa Fundación durante el primer trimestre del año 2024.

OBJETIVO DEL INFORME

Fortalecer los servicios en la implementación del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura

METODOLOGIA (Si aplica)

N/A

DESARROLLO / HALLAZGOS

Actividades Realizadas:

1. Inspecciones Programadas: Se llevaron a cabo inspecciones periódicas programadas en todo el equipamiento electromédico y de seguridad del hospital, siguiendo el calendario establecido por el departamento de mantenimiento.
2. Mantenimiento Preventivo: Se realizaron tareas de mantenimiento preventivo según las especificaciones del fabricante para cada equipo, incluyendo limpieza, calibración, lubricación y reemplazo de piezas según sea necesario.
3. Reparaciones Menores: Se atendieron y solucionaron rápidamente las fallas menores detectadas durante las inspecciones, evitando que se convirtieran en problemas mayores que afectarían la operatividad del equipamiento.
4. Actualización de Documentación: Se revisaron y actualizaron los registros de mantenimiento preventivo de cada equipo, asegurando que estén completos y al día para fines de auditoría y seguimiento.
5. Capacitación del Personal: Se prevé mantener capacitado al personal técnico y de mantenimiento sobre las mejores prácticas de mantenimiento preventivo y el manejo adecuado de equipos médicos y de seguridad.

RESULTADOS / CONCLUSIONES

Resultados y Conclusiones:

1. Mejora en la Disponibilidad del Equipamiento: Gracias al mantenimiento preventivo realizado de manera regular, se ha logrado mantener la disponibilidad del equipamiento y de infraestructura en niveles óptimos, minimizando tiempos de inactividad.
2. Reducción de Costos: La realización de mantenimiento preventivo ha contribuido a reducir los costos asociados con reparaciones mayores y reemplazos de equipos, al prevenir averías y alargar la vida útil del equipamiento.
3. Seguridad del Paciente: Se ha garantizado la seguridad de los pacientes y del personal al mantener en funcionamiento adecuado equipos críticos como nebulizadores, abanicos, etc.
4. Continuidad del Servicio: El programa de mantenimiento preventivo ha asegurado la continuidad en la prestación de servicios médicos, evitando interrupciones no planificadas debido a fallas en el equipamiento.

En general, el seguimiento al mantenimiento preventivo del Hospital Municipal Villa Fundación ha sido exitoso, contribuyendo a mantener la calidad y seguridad en la atención médica brindada a la comunidad.

RECOMENDACIONES

N/A

ANEXOS (Si aplica)

Plan, seguimiento y evidencias de los mismos.

Instrucciones de llenado:

*Indique nombre del lugar: Este campo sólo aplica para SRS, Hospital y CPN.



Elaborado por
(Nombre y apellido)



MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024

Instalación / Maquinaria (Nombre del Equipo)	Elementos del Equipo a mantener (Mantenimiento)	Descripción Actividad a Realizar	Mantenimiento Prevent. o Correct.	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento			Observaciones
							Ene	Feb	Mar	
Maquina de Anestesia	Limpieza	Revisión general, Verificación	Preventivo	Trimestral	09/11/2023	18/03/2024			X	
Mesa de Cirugia	Verificacion de posiciones	Mantenimiento preventivo e	Preventivo	Trimestral	-	25/03/2024				
Negatoscopio	Limpieza	Limpieza del equipo (en cad	Preventivo	Semestral	-	29/01/2024	X			
Lampara Automatica Bifocal	bombilla	Verificación de bombillos, v	Preventivo	Trimestral	-	18/03/2024			X	
Desfibrilador	limpieza	Limpieza del equipo (en cad	Preventivo	Trimestral	-	18/03/2024			X	
Nebulizador	limpieza	Limpieza y prueba de funcio	Preventivo	Trimestral	-	18/03/2024			X	
Otoscopio	Prueba de funcionamiento	Limpieza y desinfección. Ca	Preventivo	Trimestral	-	18/03/2024			X	
Lamparas: Ultra Violeta, Sieteletica	Prueba de Funcionamiento	Chequeo de partes eléctrica	Preventivo	Trimestral	09/11/2023	18/03/2024				
Pie de Suero	Ruedas y pintura	Mantenimiento de pintura, v	Preventivo	Anual	-	20/03/2024				
Incineradores de Aguja	El corte de aguja	Limpieza, verificación eléct	Preventivo	Semestral	-	03/06/2024				
Set de Diagnostico	Baterias	Cambios de baterías, verific	Preventivo	Trimestral	-	18/03/2024			X	
Balanza de adulto	Limpieza y Calibracion	Lubricación, calibración reg	Preventivo	Anual	-	01/07/2024				
Camillas de examen fija	Limpieza y Lubricacion	Limpieza general.	Preventivo	Semestral	-	10/06/2024				
Electrocardiografo	Prueba de funcionamiento	Chequeo partes electrónica,	Preventivo	Trimestral	-	25/03/2024			X	
Esterilizadores	Chequeo de funcionamiento	Se realiza limpieza del equi	Preventivo	Trimestral	27/07/2023	25/03/2024			X	Requieren Mantenimiento Correctivo, por un tecnico especializado.
Lampara Cuello de Ganzo	bombillos y cable electrico	Comprobación alimentación	Preventivo	Trimestral	-	18/03/2024				
Camilla Hospitalaria Electrica	Partes electricas, limpieza	Limpieza general, lubricació	Preventivo	Trimestral	-	25/03/2024			X	
Camilla Hospitalaria de Transport	Limpieza y Ruedas	Limpieza general, lubricació	Preventivo	Trimestral	-	25/03/2024				
Balanza Pediatrica	Baterias y Calibracion	Calibración reguladora dep	Preventivo	Anual	-	01/07/2024				
Camilla de Parto	Funcionamiento	Limpieza general y desinfecc	Preventivo	Trimestral	-	25/03/2024			X	
Sillas de Ruedas	El aire e las gomas	Prueba de funcionamiento, c	Preventivo	Mensual	-	25/01/2024	X	X	X	
Unidad Odontologica	Partes electricas, agua, aire,	Prueba de funcionamiento, r	Preventivo	Trimestral	26/10/2023	27/03/2024			X	
Compresor de aire Unidad Odont	Calibracion de presion, part	Calibración de presión, che	Preventivo	Trimestral	-	27/03/2024				
Amargamador	temporizador, sostenedores	Limpieza del equipo con un	Preventivo	Trimestral	-	27/03/2024				
Microscopio	Prueba de lentes	Limpieza de lentes(en cada	Preventivo	Anual	-	29/01/2024	X			
Centrifugas de 6 y 24 tubos	Prueba de Funcionamiento	Mantenimiento general, lim	Preventivo	Trimestral	-	20/03/2024			X	
Analizador de quimica	Prueba de funcionamiento	Mantenimiento general, lim	Preventivo	Trimestral	30/11/2023	20/03/2024				
Rotador Giratorio	Prueba de funcionamiento	Mantenimiento general, lim	Preventivo	Trimestral	-	20/03/2024				
Neveras: Laboratorio-Farmacia-O	Temperaturas, condiciones	Limpieza general, lavado int	Preventivo	Trimestral	-	18/03/2024				
Maquina de Hemograma	Prueba de Funcionamiento	Limpieza, mantenimiento ge	Preventivo	Trimestral	-	20/03/2024				
Rotador de Hemograma	Controles de velocidad	Limpiar superficialmente qu	Preventivo	Trimestral	-	20/03/2024				
Porta Pipetas	Prueba de Succion	Verificación sistema de succ	Preventivo	Trimestral	-	20/03/2024				
Equipo de Quimica	Prueba de Funcionamiento	Prueba de funcionamiento, c	Preventivo	Trimestral	03/01/2024	20/03/2024				
Aspirador Quirurgico	verificacion de mangueras y	Revisión general, Verificaci	Preventivo	Trimestral	02/11/2023	18/03/2024				
Maquina Reveladora Rx	Cambios de quimicos y Lim	Desactivar el interruptor mu	Preventivo	Mensual	-	19/03/2024	X	N/A	N/A	Esta fuera de servicio(dañado)
Negatoscopio Rx	Limpieza,	Chequeo lámpara fluoresce	Preventivo	Trimestral	-	19/03/2024				
Cuna de calor radiante	bombillas, revision electrica	Limpieza general y desinfecc	Preventivo	Trimestral	-	18/03/2024				
Abanicos: Techo, Pared, Pedestal	Limpieza, chequeo fisico	Limpieza general, lavado int	Preventivo	Trimestral	04/12/2023	29/02/2024			X	
Aires Acondicionados	Filtros de Aire	Chequeo diagnostico, chequ	Preventivo	Trimestral	18/12/2023	04/03/2024			X	
Lavadoras	Prueba de Lavado y secado	Mantenimiento de chequeo e	Preventivo	Semestral	-	06/05/2024				
Neveras y Freezer	Prueba de temperaturas y co	Limpieza general, lavado int	Preventivo	Trimestral	-	18/03/2024				
Planta Electrica	Cambio de Aceite y funcion	Chequeo voltaje de salida, r	Preventivo	Trimestral	23/11/2023	19/03/2024				
Bomba de Agua Potable	Capacidad de Succion de A	Verificación de partes eléct	Preventivo	Trimestral	22/11/2023	19/03/2024				
Planta Fisica	Limpieza, mantenimiento	Limpieza general, verificaci	Preventivo	Mensual	16/11/2023	15/01/2024	X	X	X	
Instalaciones Sanitarias	Revison	Reparaciones de tuberías, ll	Preventivo	Mensual		15/01/2024			X	
Instalaciones Electricas	Chequeo Electrico	Verificación de voltaje, cond	Preventivo	Mensual	26/09/2023	02/01/2024			X	



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 29/1/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Neganooscopio

Marca: _____

Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación: Emergencia

Inventario No. 94

Periodo: 4M **6M** 12M Otro: _____

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Paño húmedo - agua

Condición Final x

Este equipo está funcionando, no obstante presenta deterioro físico.

Nombre del Electromédico _____

Encargado de Área _____





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 29/1/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Microscopio

Marca: Olimpos

Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación: Sabonaterio

Inventario No. 333

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:


Materiales Utilizados

Alcohol
Toallas húmedas

Condición Final

Nombre del Electromédico

Encargado de Área

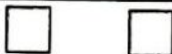



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 29/1/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Microscopio

Marca: OLYMPUS

Modelo: CH20

Serie: _____

Ubicación: Basitoscopia

Inventario No. 480

Periodo: 4M 6M 12M Otro:

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Alcohol
Paño húmedo

Condición Final

Nombre del Electromédico _____



En cargo de Área _____



SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 19/3/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Maquina Reveladora Rx

Marca: TOSHIBA

Modelo: _____

Serie: _____

Ubicación: Rx Imagen

Inventario No. 453

Periodo: 4M 6M 12M Otro: _____

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Condición Final x

Dañada

Nombre del Electromédico





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 18/3/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Desfibrilador

Marca: MINDRAY

Modelo: BENE-HEART I

Serie: _____

Ubicación: _____

Inventario No. 112

Periodo: 4M 6M 12M Otro: Trimestral

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:


Materiales Utilizados

Pano húmedo

Condición Final

Nombre del Electromédico _____

Encargado de Área _____

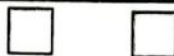

Fecha:

25/3/2024

Ficha No:

Datos del Equipo

Nombre:

Electrocardiografo 3 Canales

Marca:

MINDRAY

Modelo:

BENE-HEART I

Serie:

EK 14026880

Ubicación:

Inventario No.

129

Periodo:

4M

6M

12M

Otro:

Trimestral

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Papel fundido

Condición Final

✓

×

Nombre del Electromédico

Encargado de Área

Alexander Pineda





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 25/3/2024

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Estirilizador Movil

Marca: LUTINAVER

Modelo: 2540M

Serie: _____

Ubicación: Sala de Esterilización

Inventario No. 149

Periodo: 4M 6M 12M Otro:

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Condición Final

Nombre del Electromédico

Encargado de Área





SNS
SERVICIO NACIONAL
DE SALUD

Plan de Mantenimiento Preventivo

DADM-FO-020 Versión: 01
Fecha de aprobación: 04/04/2019

Fecha: 18/3/2023

Ficha No: _____

Datos del Equipo

Nombre: Máquina de anestesia

Marca: Ohmeda

Modelo: CE-00353

Serie: _____

Ubicación: Quitoxono

Inventario No. 114

Periodo: 4M 6M 12M Otro: Trimestral

Notas:

Descripción de Acciones

Inspección Física

Revisión Operacional

Verificación Autodiagnóstico

Otras acciones:

Materiales Utilizados

Pano humedo
Alcohol

Condición Final

Nombre del Electromédico _____

Encargado de Área _____



Mantenimientos Preventivos y
Correctivos realizados
enero - marzo 2024

NEGANOSCOPIO: Verificación de funcionamiento.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
ENERO 2024



SILLAS DE RUEDAS: Prueba de funcionamiento, chequeo de fugas (aire), regulación y calibración, limpieza general.


MICROSCOPIOS: prueba de funcionamiento.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

ENERO 2024



MAQUINA REVELADORA RX
ENERO 2024

 SNS <small>SERVICIO NACIONAL DE SALUD</small>		Plan de Mantenimiento Preventivo <small>000M-FI-020 Versión: 01</small> <small>Fecha de aprobación: 04/04/2019</small>	
Fecha:	<u>19/3/2024</u>	Ficha No:	
Datos del Equipo			
Nombre:	<u>Maquina Reveladora Rx</u>		
Marca:	<u>TOEUBA</u>	Modelo:	
Serie:		Inventario No.	<u>453</u>
Ubicación:	<u>Rx Imagen</u>		
Periodo:	<input checked="" type="checkbox"/> 4M <input type="checkbox"/> 6M <input type="checkbox"/> 12M <input type="checkbox"/> Otro:		
Notas:			
Descripción de Acciones			
Inspección Física	<input type="checkbox"/>		
Revisión Operacional	<input type="checkbox"/>		
Verificación Auto diagnóstico	<input type="checkbox"/>		
Otras acciones:			
Materiales Utilizados			
Condición Final	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
<u>Dañada</u>			
Nombre del Electromédico	Encargado de Área		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

PLANTA FISICA: Limpieza general, verificación de filtraciones, condiciones de pintura, grietas, condiciones de plafón (elementos de madera), poda de jardinería y árboles, control de plagas y fumigación, higiene y ornato.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
ENERO2024



Fecha: 25/01/2024

Establecimiento de Salud:

HOSPITAL MUNICIPAL VILLA FUNDACION

Servicio Regional de Salud:

VALDESIA I

Nivel de Atención:

ZDO NIVEL


	Bueno	Regular	Malo	N/A		Bueno	Regular	Malo	N/A
01. Accesibilidad a personas discapacitadas		X			26. Condición área esterilización		X		
02. Accesibilidad ambulancia área emergencia	X				27. Condición protección hierro, puertas y ventanas	X			
03. Condición aceras perimetrales	X				28. Iluminación exterior	X			
04. Condición almacén de alimentos		X			29. Iluminación interior	X			
05. Condición áreas asépticas		X			30. Iluminación acceso a emergencia	X			
06. Condición revestimiento fachada		X			31. Condición y limpieza área lavandería		X		
07. Condición de baños		X			32. Condición letreros identificativos	X			
08. Existencia bumpers y esquineros			X		33. Condición letreros informativos	X			
09. Condición de cisterna		X			34. Limpieza en techos	X			
10. Condición caseta de desechos		X			35. Limpieza área exterior en general	X			
11. Condición caseta de planta eléctrica	X				36. Limpieza área interior en general	X			
12. Cocina: Limpieza, Olor y Condición		X			37. Condición de áreas verdes	X			
13. Condición de pisos		X			38. Condición y limpieza área morgue		X		
14. Control de plagas y animales		X			39. Existencia olores desagradables en el ambiente				X
15. Condiciones de aires acondicionados	X				40. Condición de pintura exterior		X		
16. Disposición de desechos - mobiliario inservible			X		41. Condición de pintura interior		X		
17. Disposición y estado de zafacones	X				42. Condición de sistema contra incendios	X			
18. Disposición del cableado eléctrico		X			43. Puertas de acceso en general	X			
19. Canalización aguas pluviales		X			44. Ruta de evacuación	X			
20. Canalización aguas residuales		X			45. Ruta para desechos	X			
21. Condición de mobiliarios		X			46. Rutas de acceso	X			
22. Condición área de parqueos	X				47. Suministro de agua en general		X		
23. Distribución de espacios interiores		X			48. Condición de verja perimetral		X		
24. Condición de las ventanas		X			49. Áreas sin filtraciones			X	
25. Condición de puertas y llavines	X				50. Condición de plafón en general	X			

Resultados	
Total bueno	23
Total regular	23
Total malo	3

Supervisor:



MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LLAVINES, BAÑOS (PEDIATRIA, SALA DE ESPERA, SALA DE CIRUCIA Y HABITACIONES).
FEBRERO 2024

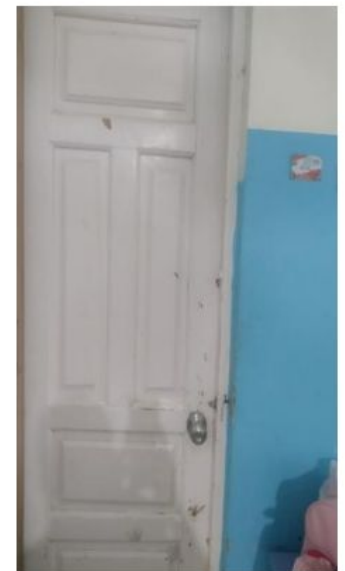



SILLAS DE RUEDAS: Prueba de funcionamiento, chequeo de fugas (aire), regulaciones general.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
FEBRERO 2024



AIRES ACONDICIONADOS : INSTACION DE NUEVOS EQUIPOS.
EMERGENCIA, MARZO 2024



AIRES ACONDICIONADOS : INSTACION DE NUEVOS EQUIPOS.
SALA DE PARTO, MARZO 2024



AIRES ACONDICIONADOS : INSTACION DE NUEVOS EQUIPOS.
EPIDEMIOLOGIA, MARZO 2024



AIRES ACONDICIONADOS : INSTACION DE NUEVOS EQUIPOS.
FARMACIA, MARZO 2024



**AIRES ACONDICIONADOS : INSTACION DE NUEVOS EQUIPOS.
LABORATORIO, MARZO 2024**




DESFIBRILADOR: Prueba de funcionamiento.

OTOSCOPIO: Limpieza del equipo (en cada uso) desinfección. Verificación de funcionamiento.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MARZO 2024

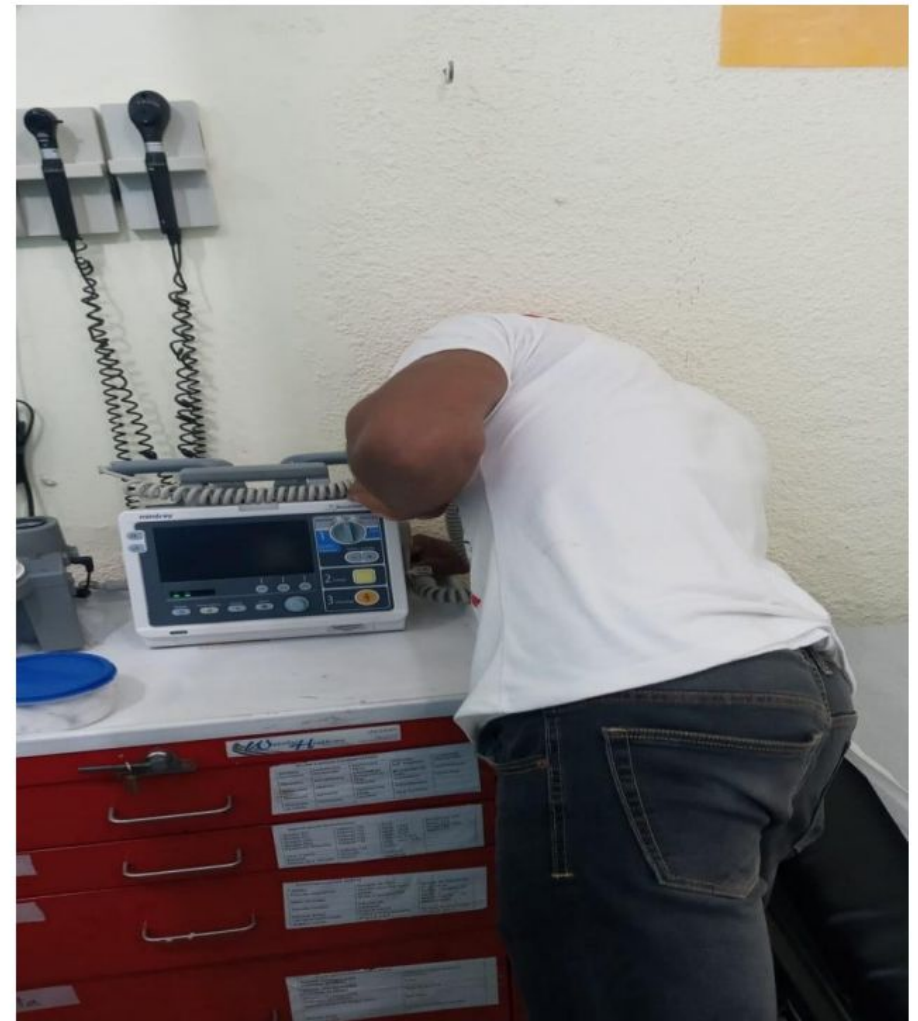

MAQUINA DE ANESTESIA: Revisión general, Verificación de componentes y sistema, Ajuste de conexión de mangueras, Verificación de parámetros, Inspección y limpieza general, Prueba de funcionamiento, manguera y filtro.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MARZO 2024



ELECTROCARDIOGRAFO: Chequeo partes electrónica, chequeo fuga de corriente, limpieza y mantenimiento electrodos de succión, chequeo parámetros.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MARZO 2024



ESTERILIZADOR MOVIL: realiza limpieza del equipo, Revisión de voltaje de red y polo tierra y componentes eléctricos, Realizar la prueba de funcionamiento del equipo haciendo tomas de temperatura, Verificar integridad y funcionamiento de sensor de control.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MARZO 2024



CAMILLA HOSPITALARIA ELECTRICA: Limpieza general, lubricación y prueba de funcionamiento, chequeo de partes electricas(Quirófano y Sala de Hospitalización)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

MARZO 2024



UNIDAD ODONTOLÓGICA: Prueba de funcionamiento, mantenimiento general, chequeo de fugas (agua aire), chequeo partes eléctricas, regulación y calibración de presión.

REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
MARZO 2024

COTIZACION

FECHA: 19/03/2024

HOSPITAL FUNDACION BANI

BANI
Teléfono 829-881-1641

LEONARDO VIZCAÍNO

Tel: 829-401-8231
Ced: 002-0069089-9

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN SILLÓN ODONTOLÓGICO. Modelo:TK-2460 <ul style="list-style-type: none"> - Adaptación de lámpara enfocable - Alimentación de los motores del mueble - Reparación de la escupidera - Alimentación de las líneas de control - Mantenimiento a la Tarjeta Electrónica - Instalación de transformador 110VTS a 24Vts 	50,000.00	RD\$50,000.00
TOTAL			RD\$ 50,000.00
ITBIS			RD\$9,000.00
TOTAL A PAGAR			RD\$59,000.00

NOTA: ESTOS EQUIPOS TENDRÁN TRES (3) MESES DE GARANTIA

ENTREGADO POR:



RECIBIDO POR: _____

CENTRIFUGA: Mantenimiento general, limpieza del equipo, prueba de funcionamiento, verificación de vibraciones o ruido en exceso.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MARZO 2024



ABANICOS: Limpieza general, lavado interno y externo, chequeo de partes eléctricas, prueba de funcionamiento.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MARZO 2024



PLANTA FISICA: Limpieza general, verificación de filtraciones, condiciones de pintura, grietas, condiciones de plafón (elementos de madera), poda de jardinería y árboles, control de plagas y fumigación, higiene y ornato.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MARZO 2024





INSTALACIONES ELECTRICAS: Verificación de voltaje, condiciones de cables eléctricos, chequeo de enchufes y toma corrientes, para cambios y reparaciones en caso que amerite, verificación externa de lámparas y letreros

