

Mantenimiento preventivo al aire del cuarto eléctrico esta en pasillo de archivo 05/03/2025.





PORTABLE AIR CONDITIONER
Model: PTA12012AR
Capacity: 12,000 BTU/h
Voltage: 115V
Power Consumption: 1000W
Noise Level: 55dB(A)
Dimensions: 14.1" x 14.1" x 24.8"
Weight: 22.9 lbs
Warranty: 1 Year
Manufacturer: Amana
Product of USA
Amana Air Conditioning Systems, Inc.
10000 W. 15th Ave., Denver, CO 80202
Tel: 303.440.1234
www.amana.com

94387 818585 216
30210612AR
11/15/2014

WARNING
Read the instruction manual before using this product.





Mantenimiento Preventivo UPS del cuarto de data pasillo de administración 8/03/2025.





Mantenimiento Preventivo a la camilla de Ginecología Limpieza general, lubricación y engranaje de partes mecánicas, prueba de funcionamiento 15/03/2025.




**Mantenimiento Preventivo reparación de fuga de agua del aire acondicionado de consulta
21/03/2025.**



Mantenimiento Preventivo cambio de batería al portátil rx 21/03/2025.




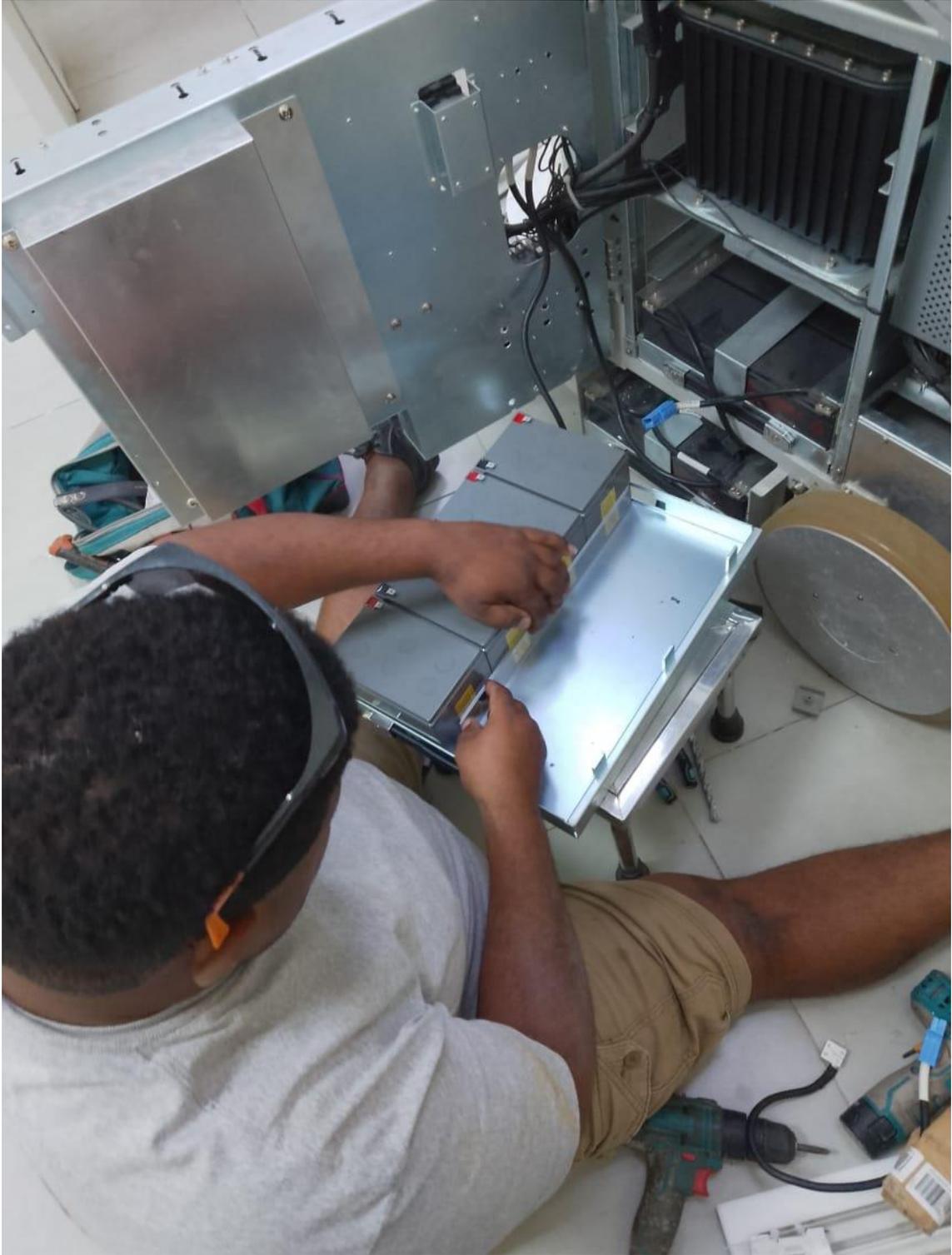







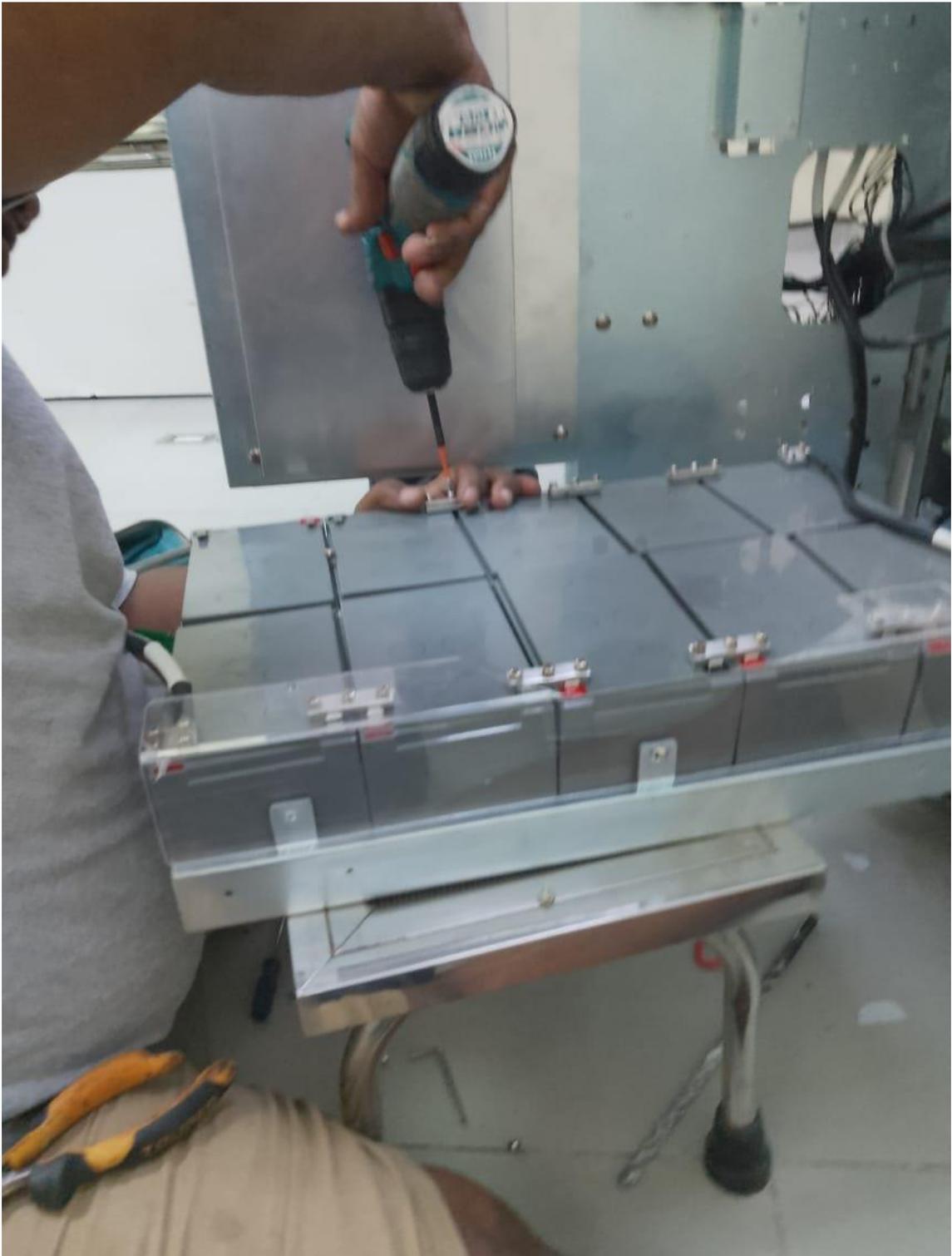

**Mantenimiento preventivo al tomógrafo Limpieza del bloqueo de escobillas y el anillo deslizante, limpieza interna del Gatry, Se verifico el registro de errores del equipo
25/03/2025.**







N°. Orden de Servicio:	34265	GON:		5255003
Cliente	Hospital Provincial San Bartolome de neyba	Marca	Modelo	Serial
		GE HEALTHCARE	Revolution Maxima	TAIXX2300048CN
Descripción del Equipo	Número Serial Tubo		Número Serial Transductor	
Imágenes - Tomografía				
Ingeniero de Servicio 1	Ingeniero de Servicio 2			
Anmin Orlando Cubilete Corcino	Alfredo Francisco Arias			


Tipo de Cobertura	Garantía	<input checked="" type="checkbox"/> Contrato Full	<input type="checkbox"/> Contrato MO	<input type="checkbox"/> Sin Contrato	<input type="checkbox"/> Instalación	<input type="checkbox"/>
Falla Reportada	Mantenimiento preventivo de Febrero 2025 (Cotización) Mantenimiento Preventivo 06			Diseño de Ambiente	<input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>

Acción Realizada	Preventiva	<input checked="" type="checkbox"/> Correctiva	<input type="checkbox"/> Instalación	<input type="checkbox"/> Otra		
Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo del equipo, que incluyó las siguientes tareas:				FECHA	HORA	
				25/Mar/2025	2.5	
- Limpieza del bloque de escobillas y el anillo deslizante.						
- Limpieza interna del Gantry.						
- Se verificó el registro de errores del equipo y no se observó ningún error que requiera seguimiento.						
- Limpieza de la consola de operaciones.						
- Limpieza del filtro de polvo del sistema de enfriamiento del tubo.						
Después del mantenimiento, se probó el equipo y se constató que funciona correctamente.						

Nota: Es responsabilidad del Físico, Médico o Técnico a cargo, verificar que el equipo cumple con los parámetros requeridos para tratamientos clínicos

Fecha de Reparación	Horas de Viaje	Horas regulares	Horas Extras	Horas Totales en Sitio
25/Mar/2025	0	2.5	0	2.5

Partes Utilizadas			
Cant	Numero de Parte	Descripción	N° Conduce

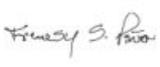Fecha	Nombre de Cliente	Firma del Cliente	Firma del Ingeniero de Servicio
			

Mantenimiento preventivo Mindray cambio de simple, cambio de lámpara 17/03/2025.





ORDEN DE SERVICIOS
RP-FP-07-06-04 Edición 4

No. 16898

Fecha: 17/3/25
Día Mes Año

CLIENTE: Hospital San Bartolome CODIGO: _____ TEL: _____
DIRECCIÓN: Neiba EMAIL: _____
ENC. LABORATORIO: _____ H / INICIO: 11:00 A.M. / TERMINO: 1:00 P.M.
FALLA REPORTADA _____

DATOS DEL EQUIPO

MODELO	MARCA	SERIE
BS-3600	Mindray	BAI-37002120

PIEZAS UTILIZADAS: SI NO

DESCRIPCIÓN DE PIEZAS

	CÓDIGO	NOMBRE	CANTIDAD
1	115-037085-00	Sugar Sample Probe Assembly	1
2	801-BA80-00222-00	Lamp (12V 120W)	1
3			
4			

- TIPO DE SERVICIO
- Reparación
 - Instalación
 - Verificación
 - Mantenimiento

- ESTATUS DE EQUIPO
- Garantía
 - Contrato
 - Propio

- CATEGORIA
- Taller
 - Lab

TRABAJOS REALIZADOS

• Cambio de Sample Probe
• Cambio de Lámpara
• Pacientes

OBSERVACIONES



William Mejia
TECNICO

Deifera Reyes
CLIENTE