


Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.

FECHA: Abril 2025

Administración de gas y mantenimiento de aire en el área de Enfermería.



Administración de gas y mantenimiento de aire en área de Psiquiatría.

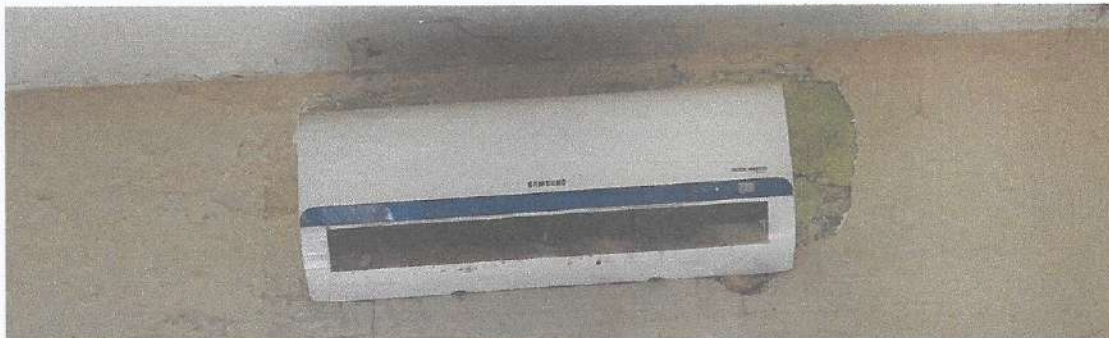

Control cloración agua cisterna

17 / 3 / 2025	9 : AM	cloro glen	3 libras
24 / 3 / 2025	11 : AM	cloro glen	3 libras
31 / 3 / 2025	9 : AM	cloro glen	3 libras
7 / 4 / 2025	11 : AM	cloro glen	3 libras
14 / 4 / 2025	9:50 AM	cloro glen	3 libras
21 / 4 / 2025	11 : AM	cloro glen	3 libras



Calendario cloracion agua cisterna



FECHA DE ELABORACION 26/12/2023

CALENDARIO DE CLORACION DEL AGUA DE LA CISTERNA AÑO 2025

MES/FECHA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ENERO																															
FEBRERO																															
MARZO																															
ABRIL																															
MAYO																															
JUNIO																															
JULIO																															
AGOSTO																															
SEPTIEMBRE																															
OCTUBRE																															
NOVIEMBRE																															
DICIEMBRE																															



Matriz para el Seguimiento Mensual a Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo



abr-25

MATRIZ PARA EL SEGUIMIENTO MENSUAL A PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2025

Plan de Mantenimiento Preventivo / Correctivo

EXX-FC-XXX Versión: 01

Fecha de aprobación: 4/28/20

Instalación / Maquinaria	Elementos a ser mantenidos	Descripción de Actividad a Realizar	Mantenimiento Preventivo o Correctivo	Periodicidad para Revisión	Último Mantenimiento	Próximo Mantenimiento	Mes de Ejecución del Mantenimiento												Observaciones
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Cisterna	agua	Cloración de agua	Preventivo	Semanal	abr-25	may-25				X									
Acondicionamiento de aire	Equipo	Administración de gas y mantenimiento	Preventivo	Según necesidad	abr-25	may-25				X									
EM-149 Monitor de signos vitales básico tipo	Equipo	Revisión de circuitos internos, ajuste de configuraciones, revisión de cables de parámetros, pruebas de funcionamiento correcto, revisión de batería y limpieza	Preventivo	cada 3 meses	abr-25	jul-25				X									
EM-009 Desfibrilador Básico	Equipo	Limpieza y mantenimiento en general, ajuste de configuraciones, revisión de circuitos eléctricos y chequeo del funcionamiento de paletas y cables de conexión.	Preventivo	Cada 3 meses	abr-25	jul-25				X									
EM-016 Aspirador Portátil	Equipo	Prueba de funcionamiento, revisión de filtro de control de humedad, limpieza general y revisión de manguera.	Preventivo	Cada 3 meses	abr-25	jul-25				X									
EM-138 Máquina de Anestesia con sistema de monitoreo completo.	Equipo	Revisión de funcionamiento, revisión de fugas y revisión de sistema oximétrico y flujo.	Preventivo	cada 3 meses	abr-25	jul-25				X									
EM-144 Monitor de gases anestésicos	Equipo	Limpieza y mantenimiento en general, prueba de sensores, chequeo del funcionamiento de electrodos y cables de conexión.	Preventivo	cada 3 meses	abr-25	jul-25				X									
EM-148 Monitor de signos vitales avanzado	Equipo	Revisión de circuitos internos, ajuste de configuraciones, revisión de cables de parámetros, prueba de funcionamiento y revisión de batería.	Preventivo	cada 3 meses	abr-25	jul-25				X									
EM-150 Ventilador adulto pediátrico grado hospitalario.	Equipo	Revisión y chequeo de funcionamiento eléctrico y revisión del funcionamiento de manómetro.	Preventivo	cada 3 meses	abr-25	jul-25				X									
EM-068 Electrocardiógrafo 12 derivaciones con carro de transporte.	Equipo	Revisión y chequeo de cable de potencia, ajuste de configuraciones, ajuste de tornillo y piezas del equipo, revisión de printer y batería.	Preventivo	cada 3 meses	abr-25	jul-25				X									
EM-183 Rayos X Portátil	Equipo	Revisión de funcionamiento, ajuste y configuración del sistema computarizado, chequeo de partes móviles y carro de transporte, revisión de las placas de radiografía.	Preventivo	cada 3 meses	abr-25	jul-25				X									
EM-147 Monitor de signos vitales básico	Equipo	Revisión de circuitos eléctricos, ajuste de configuraciones, revisión de cables de parámetros, pruebas de funcionamiento correcto, revisión de batería y limpieza	Preventivo	cada 3 meses	abr-25	jul-25				X									
EM-100 Torre laparoscopia	Equipo	Revisión de funcionamiento, revisión de bombilla, limpieza de ventiladores, configuración y calibración del sistema, mantenimiento en general.	Preventivo	cada 3 meses	abr-25	jul-25				X									



